
Anlegen des Matodrape Angiografie-Sets

1




Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

2

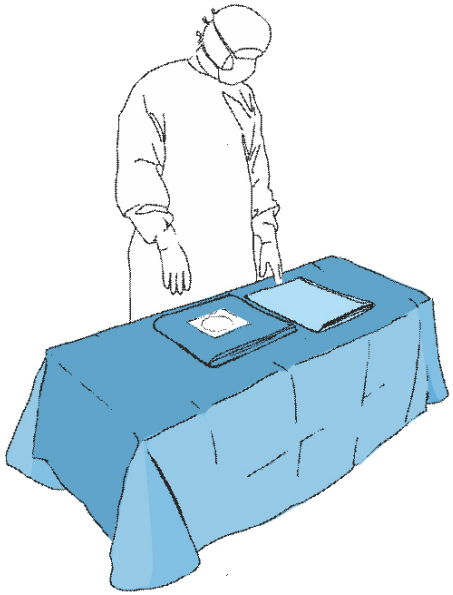

Vor Sicherung des Patienten (Bestimmung des OP-Feldes) die Auslegungsrichtung der Abdeckung berücksichtigen und dazu die auf dem Abdecktuch angebrachten Piktogramme nutzen.


3

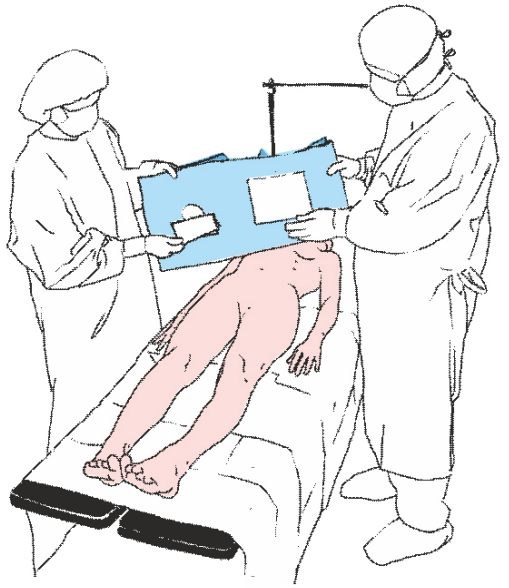

Das Schutzpapier aus der gewählten Öffnung des Hauptabdecktuchs entfernen (zweite Öffnung bleibt zugedeckt).


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

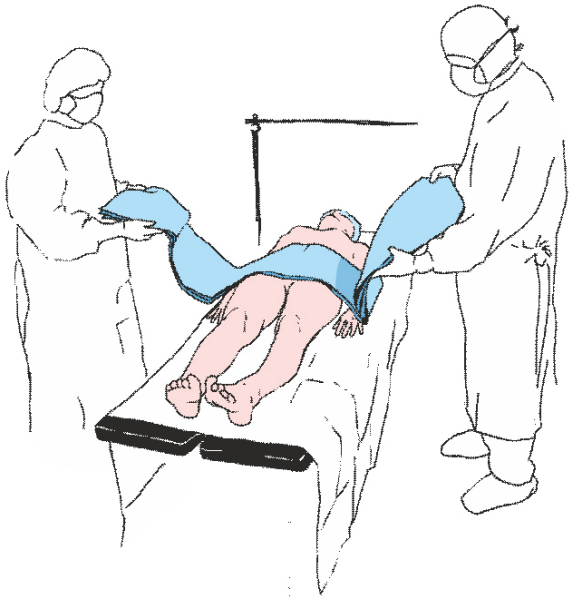

Die Abdeckung bei gleichzeitiger Bestimmung des OP-Feldes ankleben. Als Nächstes an der Klebestelle der Abdeckung zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut des Patienten zudrücken.

5

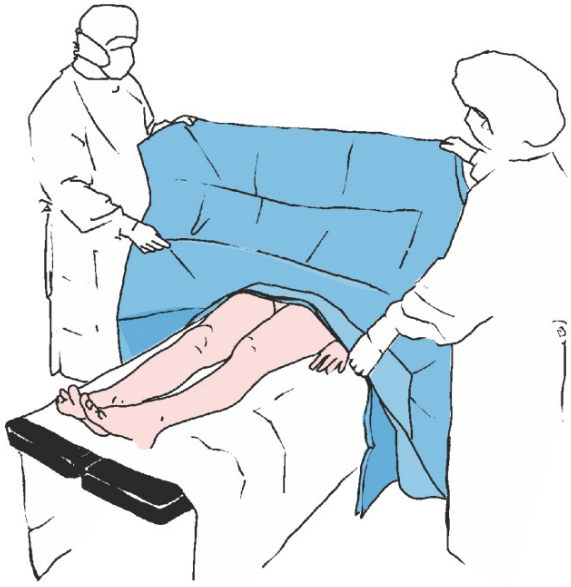

Die Ränder der Abdeckung so auslegen, damit sie vom OP-Tisch herabhängen. Den oberen Teil der Abdeckung in die Richtung des Kopfes entfalten.


6



Den unteren Teil der Abdeckung in die Richtung der unteren Ecke des OP-Feldes auslegen und die unteren Extremitäten des Patienten sichern.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

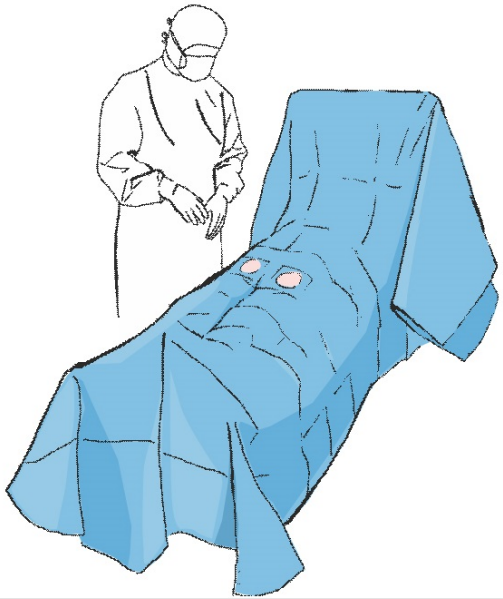

Auf die Anästhesie-Abschirmung wird eine des kleineren Abdecktuches zur Trennung des Patientenkopfes vom OP-Feld angebracht.

8

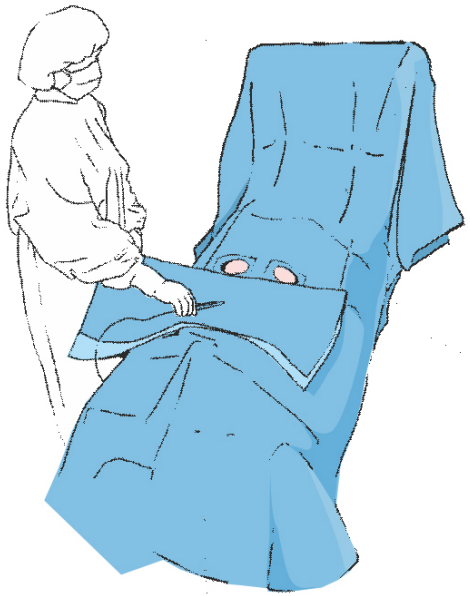

Zum Schluss auf den Patienten das zweite kleinere Abdecktuch legen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026