
Anlegen des Matodrape Bypass-Sets

1



Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

2

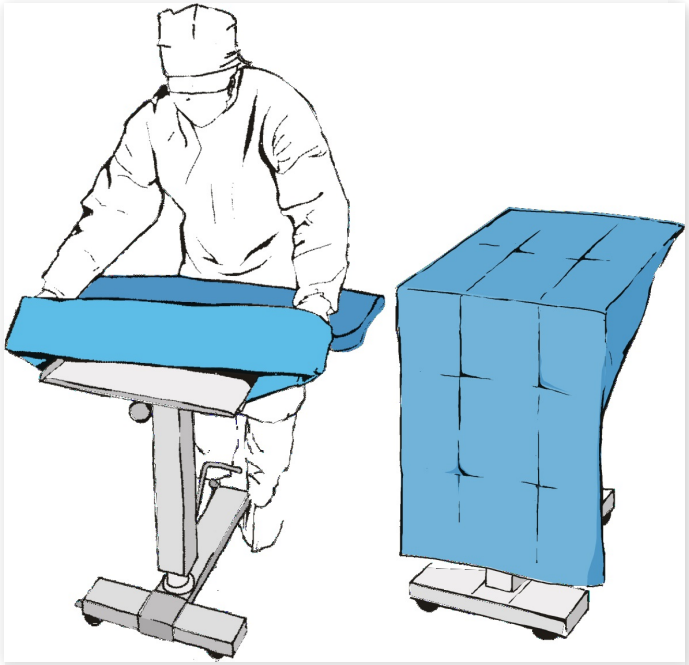

Den Bezug auf den Mayo-Tisch anbringen.


3



Vor Sicherung des Patienten (Bestimmung des OP-Feldes) die Auslegungsrichtung der Abdeckung berücksichtigen und dazu die auf dem Abdecktuch angebrachten Piktogramme nutzen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

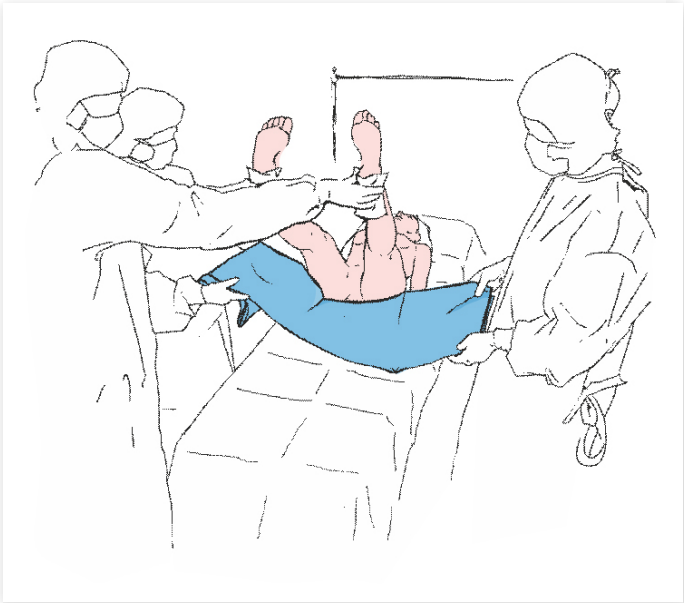


Die unteren Extremitäten des Patienten nach oben heben und dazu die zum Set beigelegten Handtücher verwenden. Unter die gehobenen Extremitäten das Abdecktuch mit Genitalbereichabdeckung unterlegen.

5

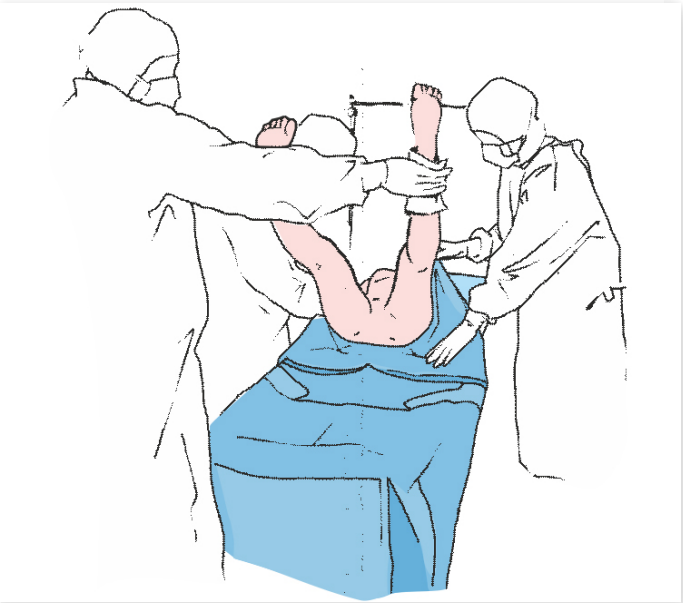

Das Abdecktuch in Richtung der unteren Ecke des OP-Tisches entfalten.


6

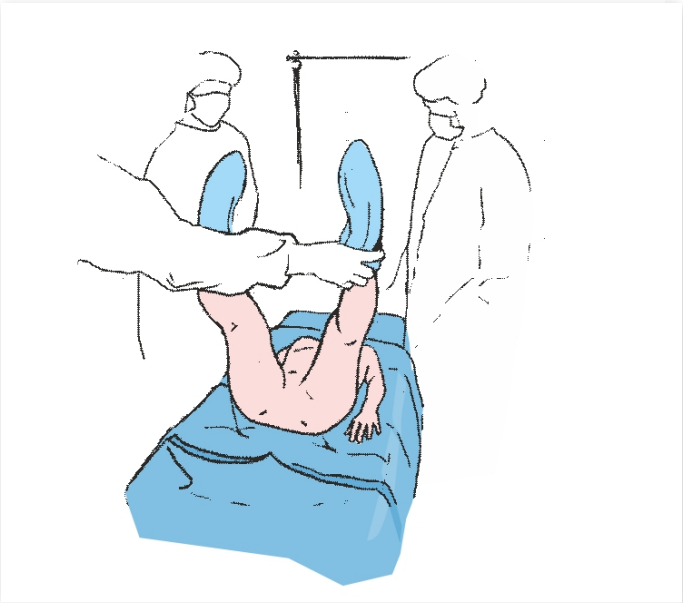

Bezüge auf die Füße des Patienten anziehen und sie im Bereich der Sprunggelenke fest binden.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

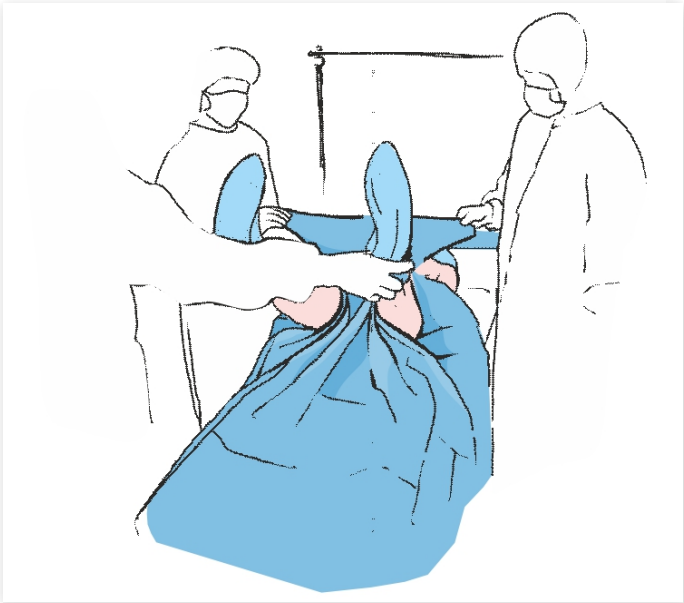


Die Genitalbereichabdeckung zwischen die Schenkel des Patienten legen, ...

8



... das Schutzpapier entfernen und die an den Unterleib kleben.


9

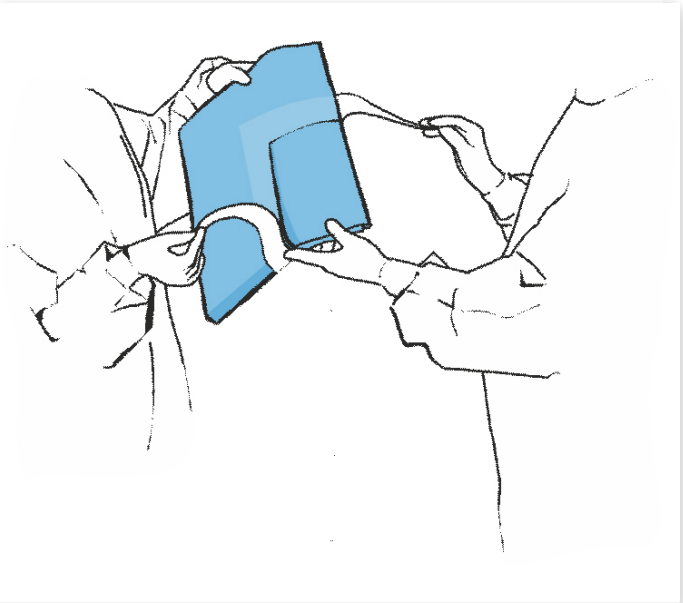

Das Schutzpapier aus der Öffnung im zweiten Hauptabdecktuch entfernen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

10

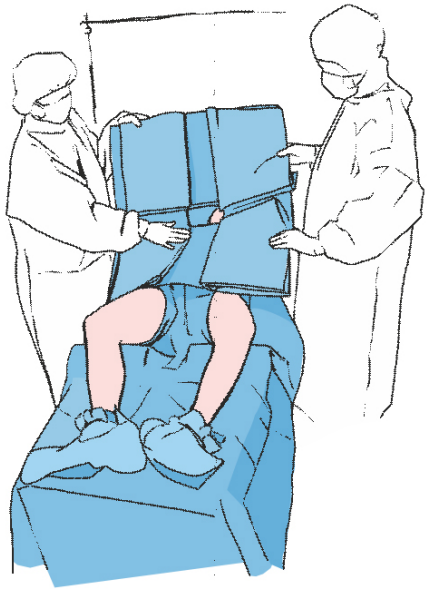


die Abdeckung an den Brustkorb bei gleichseitiger Bestimmung des OP-Feldes bestimmen. Als Nächstes an der Klebestelle der Abdeckung zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut des Patienten zudrücken.

11

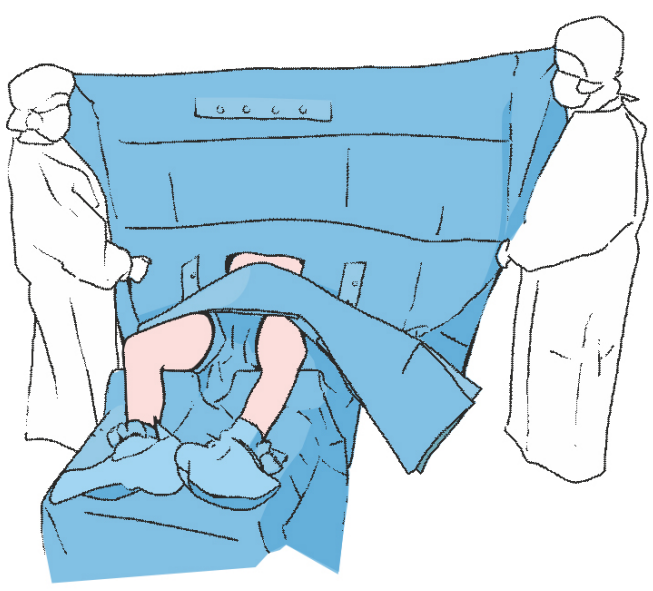

Die Ränder der Abdeckung so auslegen, damit sie vom OP-Tisch herabhängen und den oberen Teil der Abdeckung in Richtung des Patientenkopfes gemäß der Pfeilrichtung (in Richtung des Anästhesiestands) entfalten. Die Abdeckung durch den Rahmen ziehen, an die Ständer befestigen und somit die Anästhesie-Abschirmung gestalten.


12

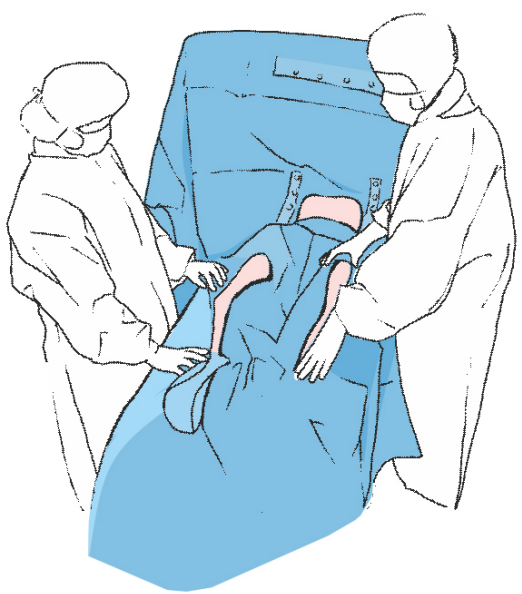

Den unteren Teil der Abdeckung in die Richtung der unteren Ecke des OP-Feldes auslegen und die Grenzen mittels zwei Längsöffnungen bestimmen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

13

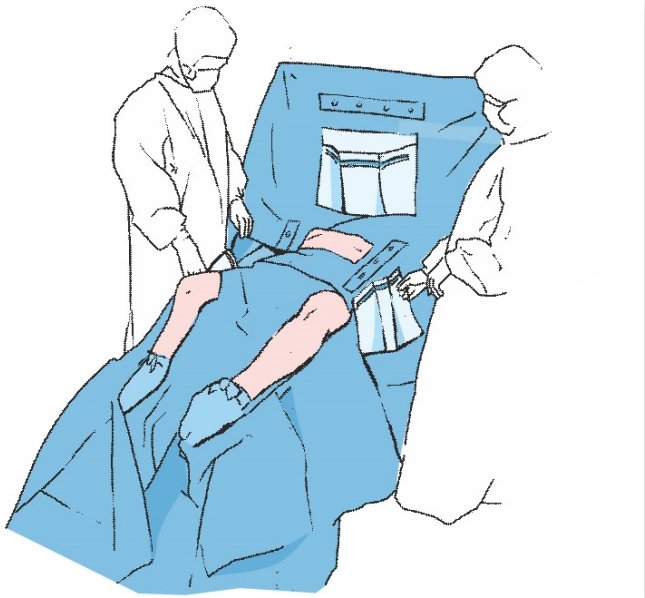

Zum Schluss an die Abdeckung die Folienbeutel befestigen – vorher das Schutzpapier von der Klebeschicht lösen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026