

Anlegen des Matodrape Hand-Fuß-Sets

1

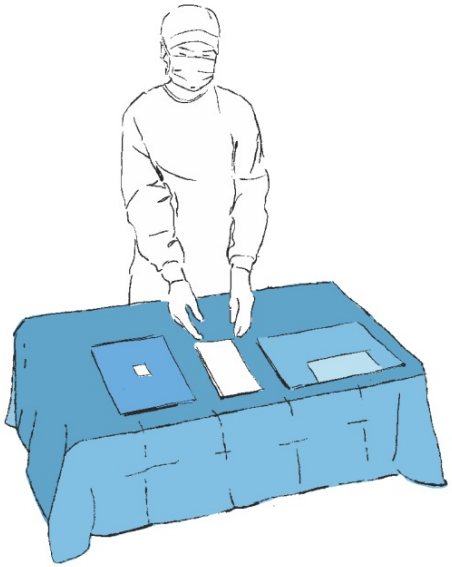

Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

2

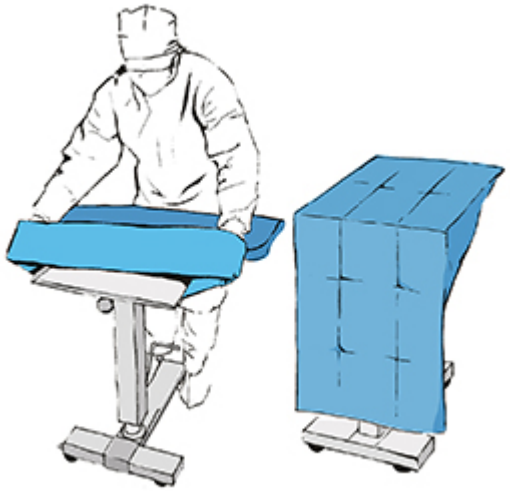

Den Instrumententischbezug auflegen.


3



Bevor die Patientin zu abdecken (Abgrenzung des OP-Feldes), auf die Richtung achten, in der das Abdecktuch ausgefaltet werden soll, mithilfe der auf dem Tuch angebrachten Piktogrammen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

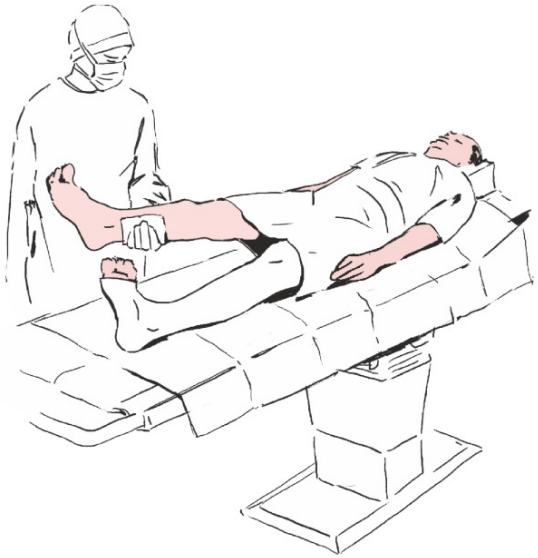


Heben Sie das obere Glied, das sich dem medizinischen Eingriff unterzieht, mit den mit dem Set gelieferten Handtüchern an.

5




Führen Sie das obere Glied des Patienten durch die elastische Öffnung im Haupttuch.

6

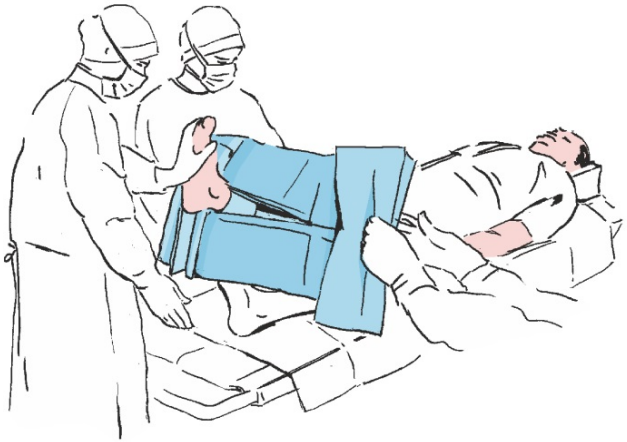


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

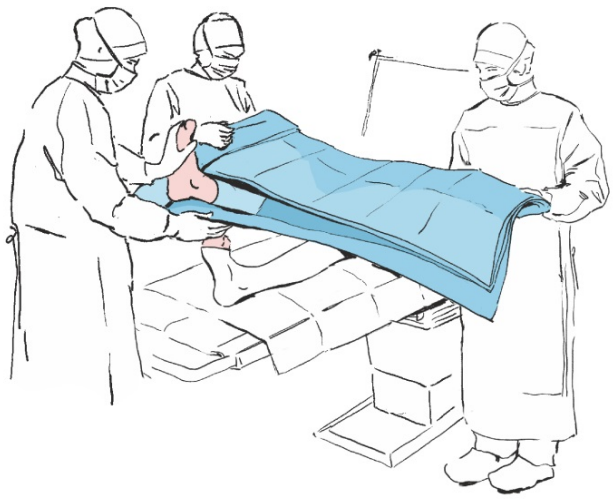


Falten Sie die Seiten der Abdecktücher so aus, dass sie frei vom Operationstisch hängen, und dehnen Sie dann den oberen Teil der Abdecktücher zum Kopf der Patientin aus (in Richtung der anästhesiologischen Position). Führen Sie die Abdeckung über den Rahmen und erzeugen Sie so einen Anästhesieschirm.

8

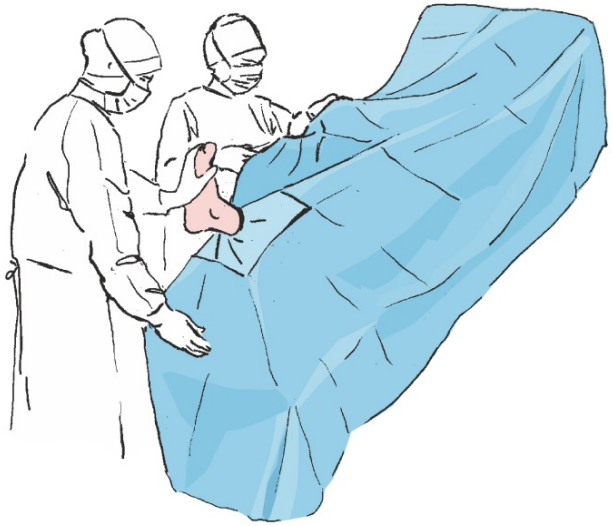

Falten Sie den unteren Teil der Abdeckung in Richtung des unteren Endes des Operationstisches und decken Sie so die unteren Gliedmaßen des Patienten ab.

9

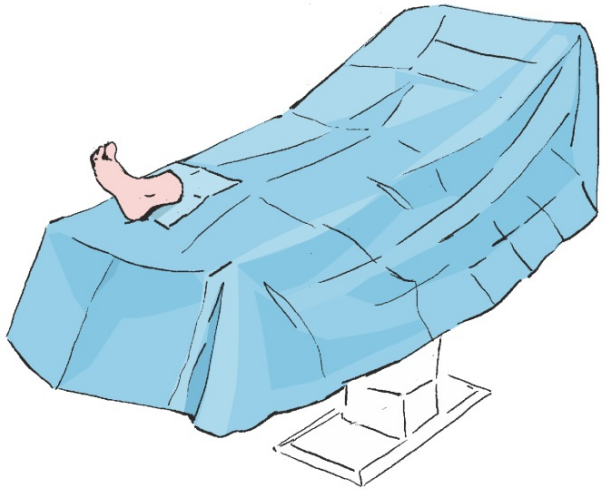

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026