

# Anlegen des Matodrape Hüftgelenk-Sets

**1**

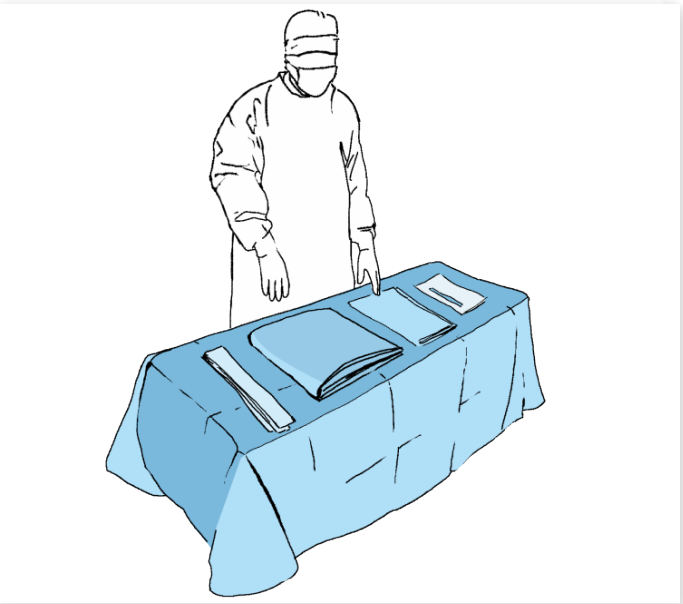


Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

**2**

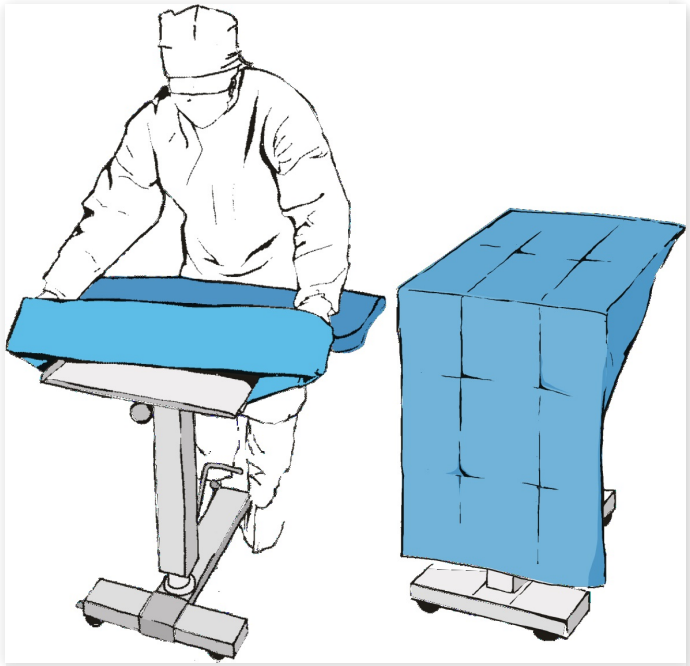

Den Instrumententischbezug auflegen.


**3**

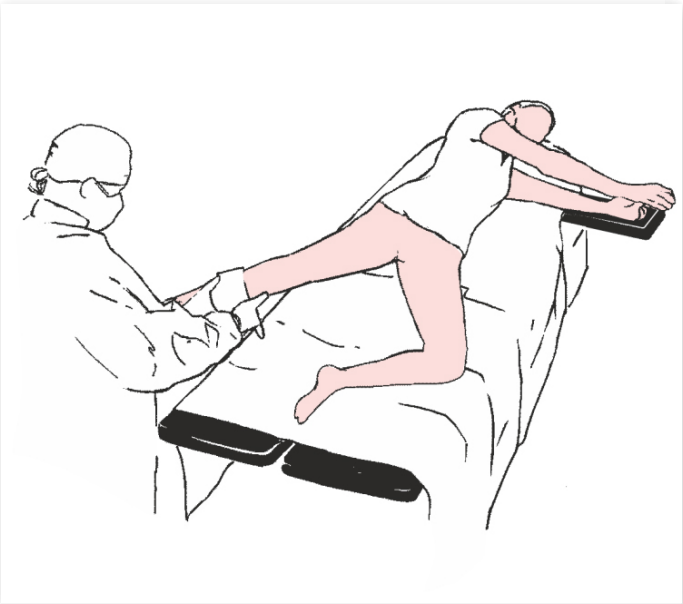

Die untere Extremität, die dem medizinischen Eingriff unterzogen wird, mit den mitgelieferten Handtüchern anheben.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

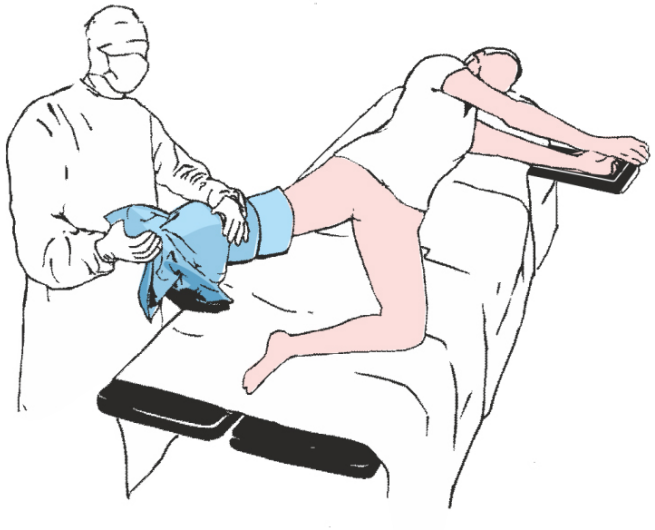


Das Abdecktuch auf die untere Extremität des Patienten in einer Höhe unterhalb des Hüftgelenks anlegen.

5

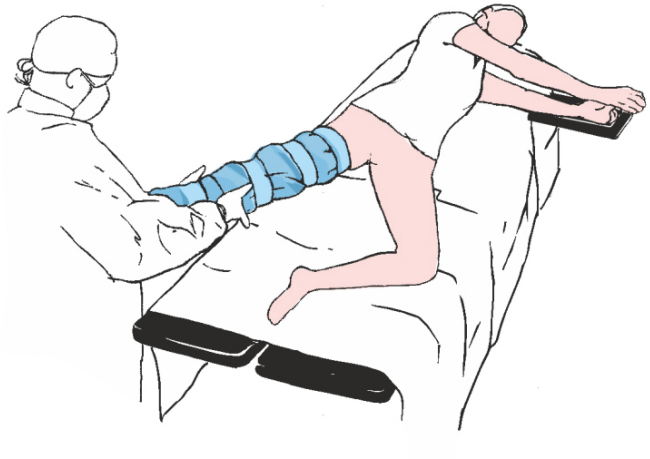

Den Beinbezug mit den mitgelieferten Klebebändern befestigen.


6

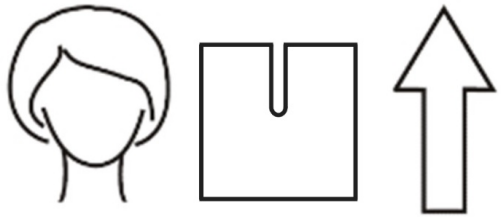

Bevor den Patienten zu abdecken (Abgrenzung des OP-Feldes), auf die Richtung achten, in der das Abdecktuch ausgefaltet werden soll, mithilfe der auf dem Tuch angebrachten Piktogrammen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

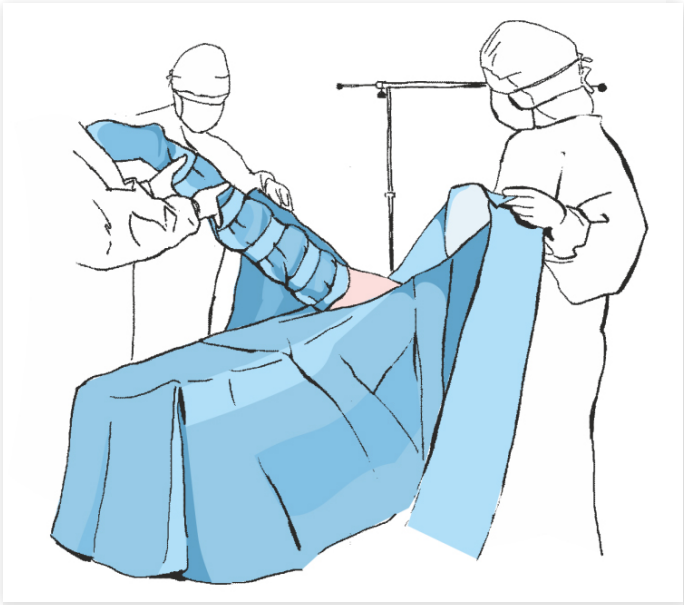


Das Tuch mit einem U-Ausschnitt unter die Hüfte des Patienten legen. Das Schutzpapier von einem kurzen Stück des Klebebandes entfernen und es genau in die Leiste des Patienten ankleben. Den unteren Teil des Tuches in Richtung des unteren Endes des OP-Feldes ausfalten und so die unteren Gliedmaßen des Patienten abdecken.

8

Die restlichen Schutzpapiere entfernen und die Hüfte in Richtung des Kopfes des Patienten bekleben, um die seitlichen Grenzen des OP-Feldes zu bestimmen. An der Klebestelle der Hülle drücken, um die Haftung des Klebebands auf der Haut des Patienten zu erhöhen.


9

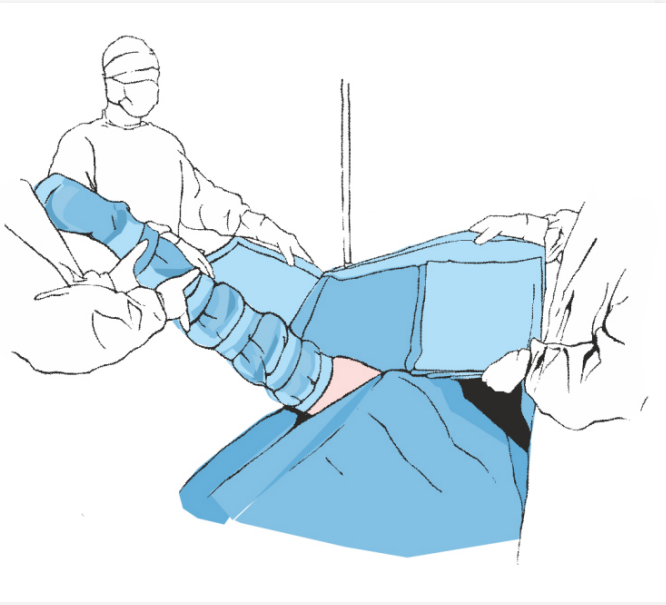

Den Schutzstreifen von dem oberen Abdecktuch. Das Tuch ankleben so, dass Falten vermieden werden und die oberen Grenze des OP-Feldes festlegen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

10

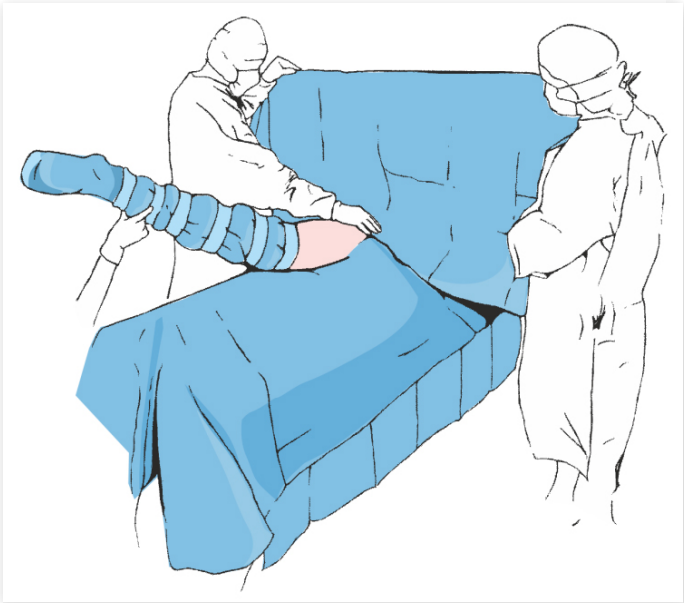


An der Klebestelle das Tuch drücken, um die Haftung des Klebebandes auf der Haut des Patienten zu erhöhen. Das Tuch in Pfeilrichtung ausfalten (in Richtung der Anästhesieposition). Den oberen Teil seitens des Patientin-Kopfs an der Anästhesie-Abschirmung befestigen.

11

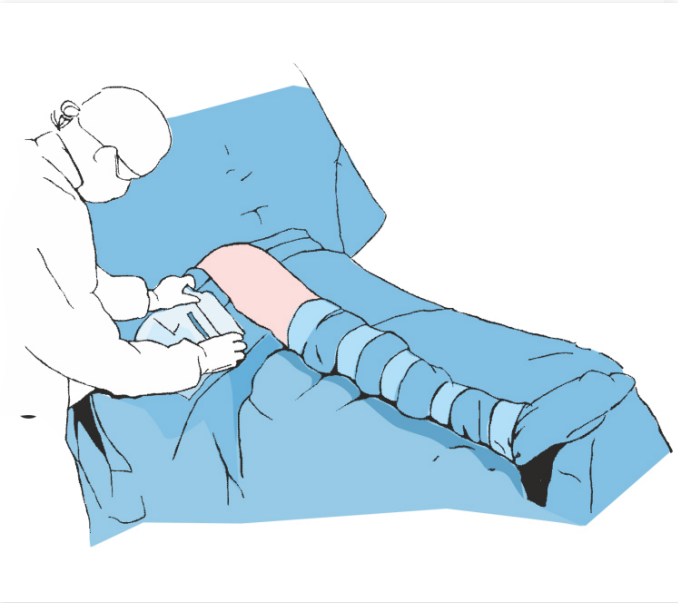

Schließlich einen Folienbeutel an dem Abdecktuch unter dem OP-Feld befestigen, damit sich tropfende Flüssigkeiten aus der Operationswunde ansammeln können.

12

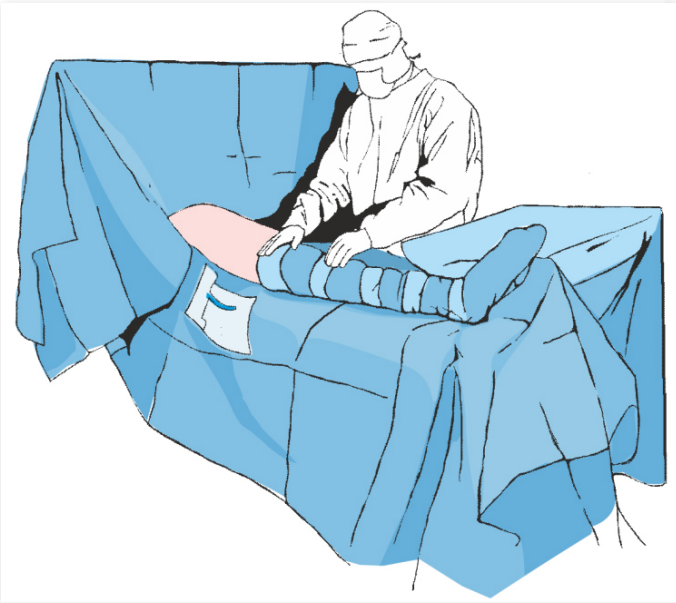

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026