
Anlegen des Matodrape Kraniotomie-Sets

1



Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

2

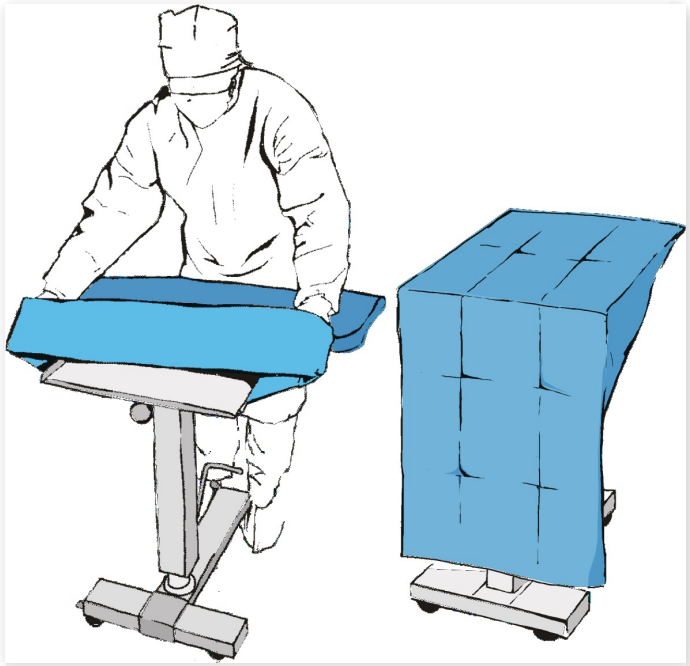

Den Bezug auf den Mayo-Tisch anbringen.


3



Vor Sicherung des Patienten die Auslegungsrichtung der Abdeckung berücksichtigen und dazu die auf dem Abdecktuch angebrachten Piktogramme nutzen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

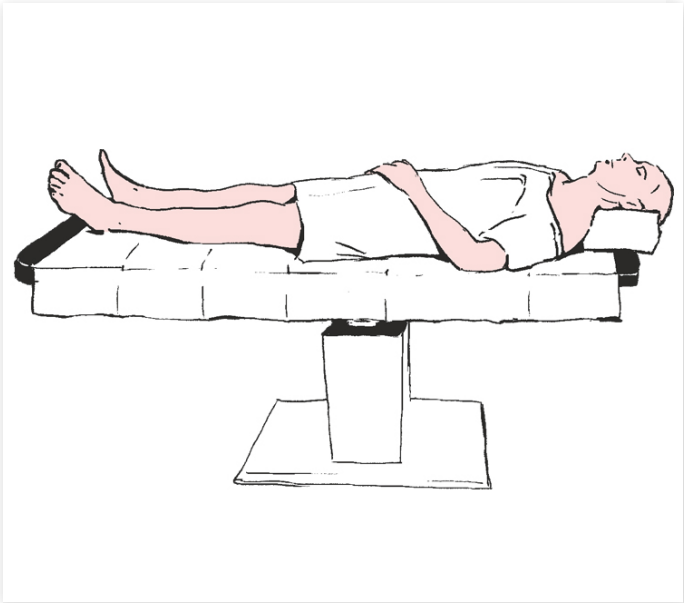


»

5

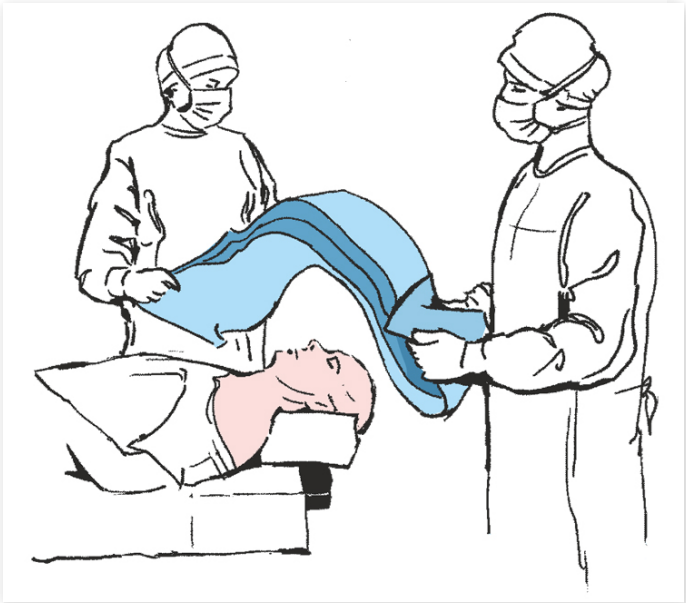

Über dem Kopf des Patienten die Ränder der Abdeckung mit Hilfe einer anderen Person so auslegen, damit sie vom OP-Tisch frei herabhängen, ...


6

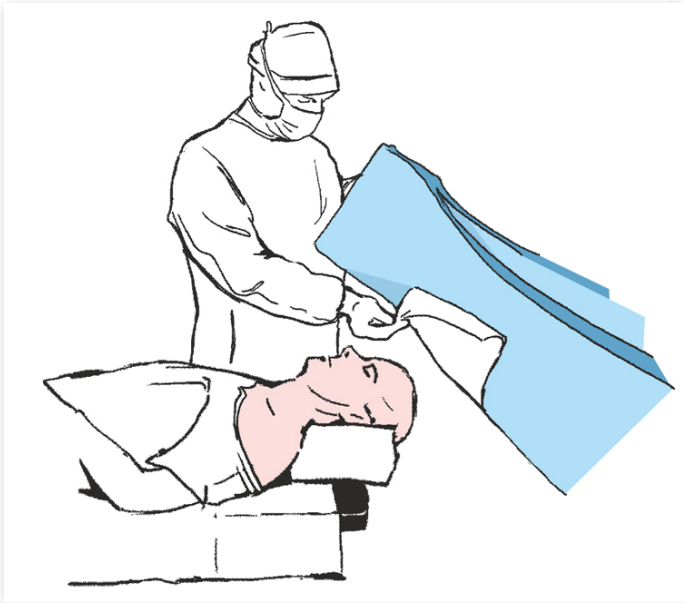

... dann das Schutzpapier der Inzisionsfolie aus der Öffnung des Hauptabdecktuchs entfernen ...


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

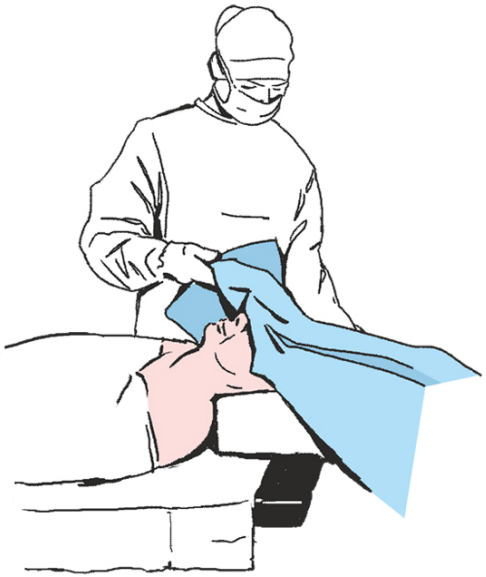

... und die Abdeckung bei gleichzeitiger Bestimmung des OP-Feldes ankleben.

8

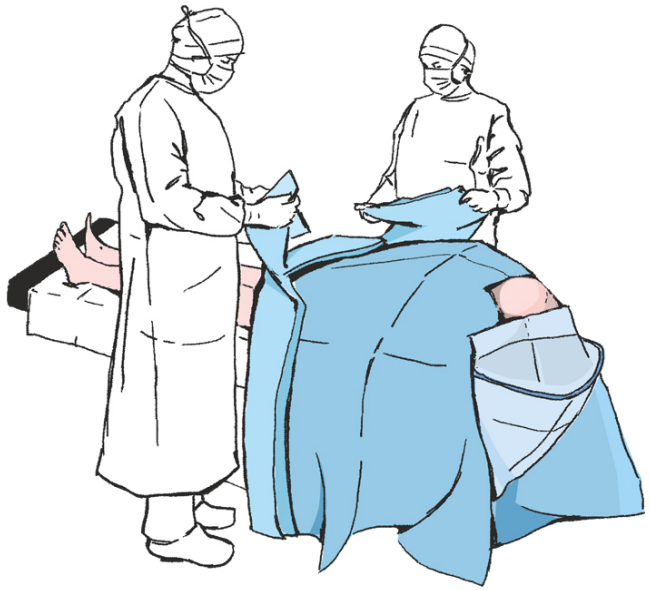


Den unteren Teil der Abdeckung in Richtung des unteren Randes des OP-Tisches bei Sicherung der unteren Extremitäten des Patienten auslegen.

9

Als Nächstes an der Klebestelle der Abdeckung mit der Inzisionsfolie zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut des Patienten zudrücken. Den oberen Teil der Abdeckung auslegen. Die Öffnung des Flüssigkeitsauffangbeutels durch Anpassung der Formeinlage formen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

10

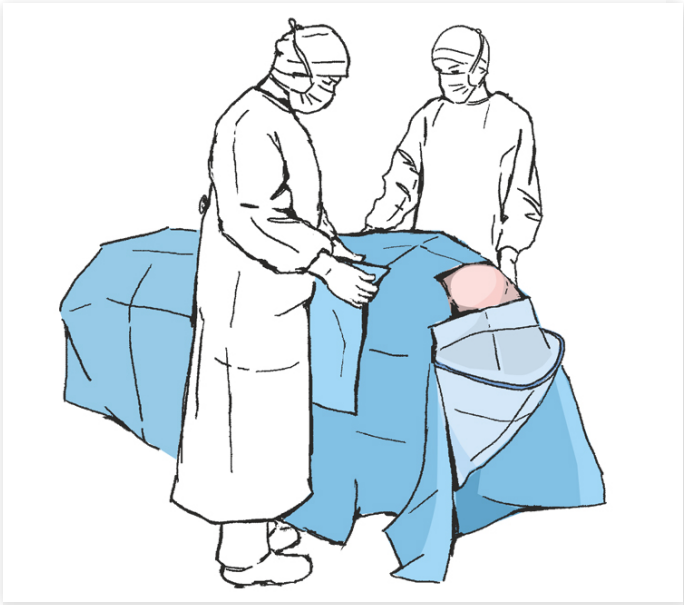


Von der rechten und linken Seite des OP-Feldes zusätzliche Befestigung in Form von Abdecktüchern mit Heftpflaster bei voriger Entfernung des Schutzpapiers ankleben.

11



Am Rand der Abdeckung die Folientasche so befestigen, um die Ansammlung von Flüssigkeiten aus der OP-Wunde ermöglichen


12

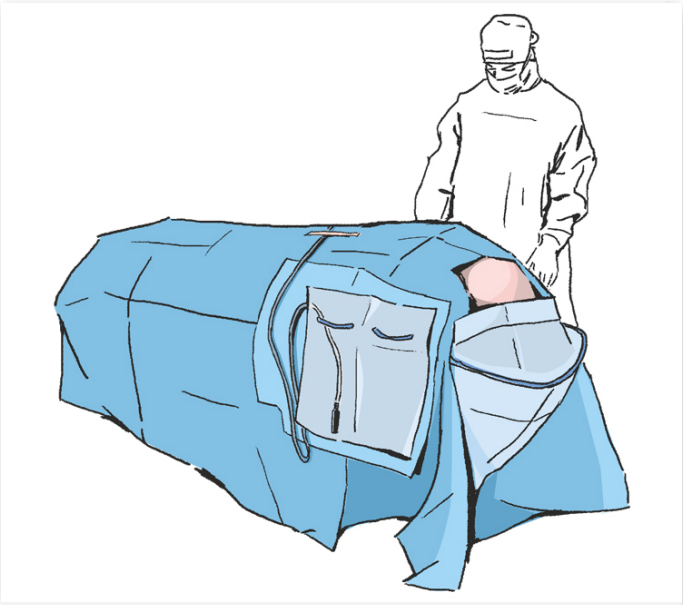

Oben der Abdeckung der Selbstklebebänder mit Klett zwecks Organisation der während des Eingriffs genutzten Kabel befestigen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

13

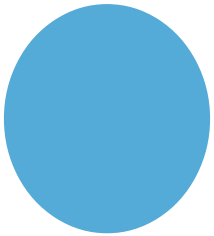

Zum Schluss die Drainage an das Ventil im Flüssigkeitsauffangbeutel anschließen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026