

# Anlegen des Matodrape Laparoskopie-Sets

**1**

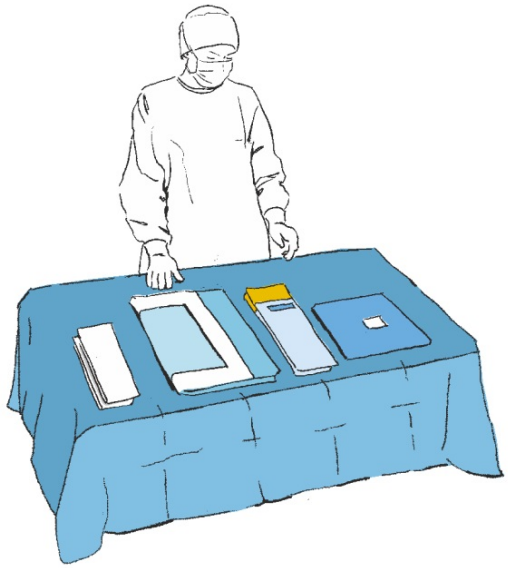

Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

**2**

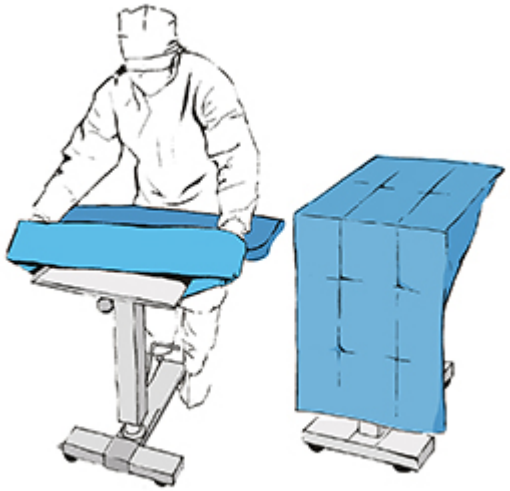

Den Instrumententischbezug auflegen.

**3**



Bevor die Patientin zu abdecken (Abgrenzung des OP-Feldes), auf die Richtung achten, in der das Abdecktuch ausgefaltet werden soll, mithilfe der auf dem Tuch angebrachten Piktogrammen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4




»

5

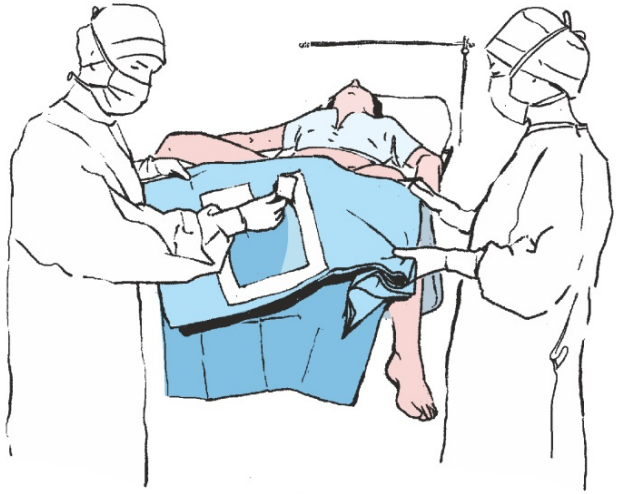

Die Ränder der Abdeckung auf die Seiten legen. Das Schutzpapier bei Bauchöffnung im Hauptabdecktuch entfernen.


6

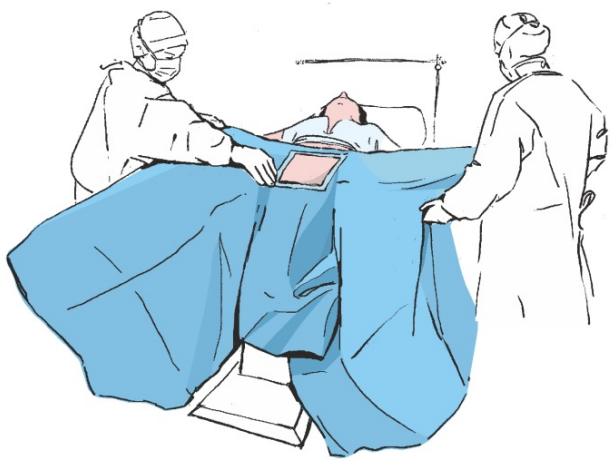

Die Beinlingen auf die Beine des Patienten schieben und die Abdeckung an den Bauch des Patienten bei gleichzeitiger Bestimmung des OP-Feldes ankleben. Als Nächstes an der Klebestelle der Abdeckung zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut des Patienten zudrücken.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

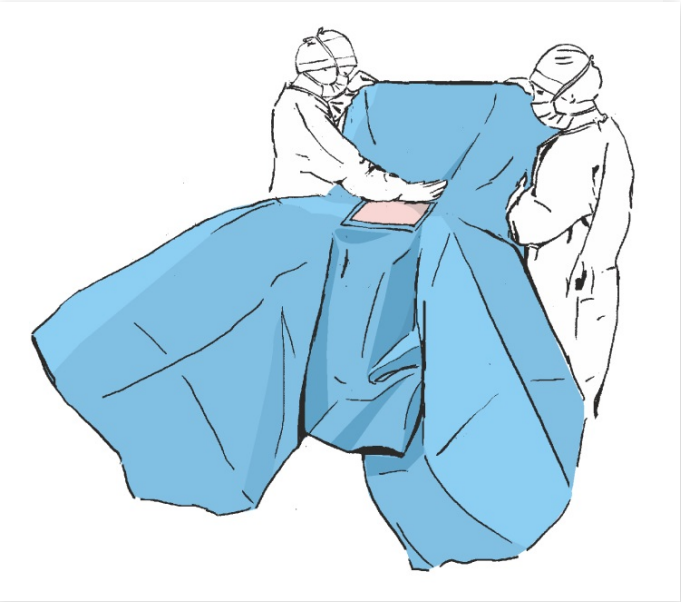

Die Ränder der Abdeckung so auslegen, damit sie vom OP-Tisch frei herabhängen, und den oberen Teil der Abdeckung gemäß der Pfeilrichtung in Richtung des Anästhesiestands entfalten. Die Abdeckung durch den Ständer ziehen und somit den Anästhesiemonitor gestalten.

8

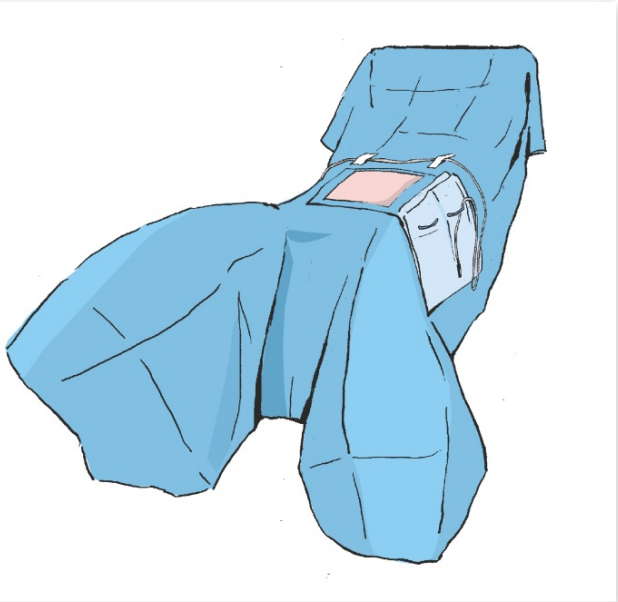

Zum Schluss an die Abdeckung den Folienbeutel befestigen – vorher das Schutzpapier von der Klebeschicht lösen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026