

Anlegen des Matodrape Laparotomie-Sets

1

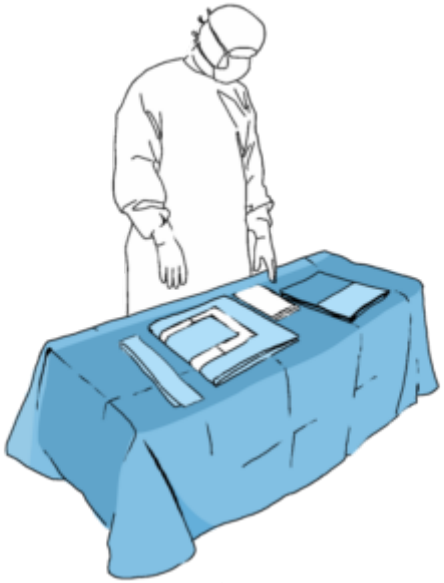

Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

2

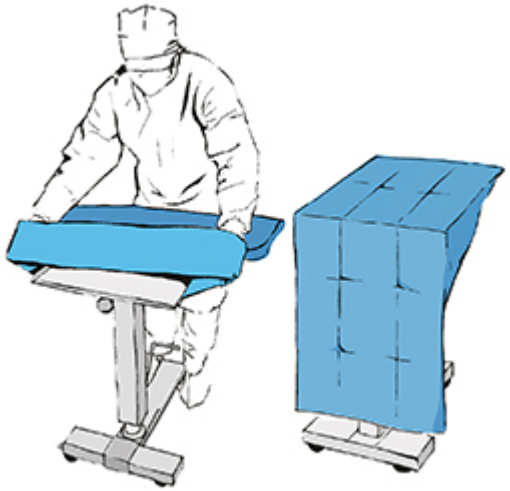

Den Instrumententischbezug auflegen.


3



Bevor die Patientin zu abdecken (Abgrenzung des OP-Feldes), auf die Richtung achten, in der das Abdecktuch ausgefaltet werden soll, mithilfe der auf dem Tuch angebrachten Piktogrammen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

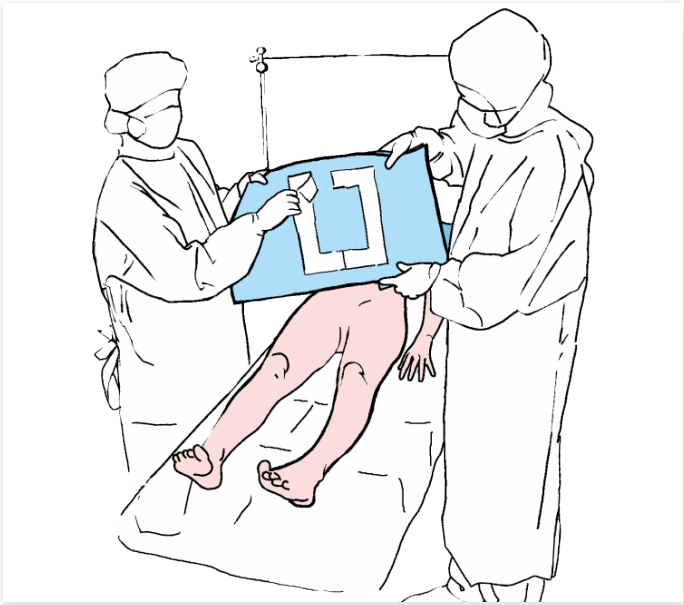


Den Schutzstreifen von dem unteren Haupt-Tuch entfernen. Das Tuch ankleben um die Grenze des OP-Feldes festzulegen. Danach an der Klebestelle das Tuch drücken, um die Haftung des Klebebandes auf der Haut des Patienten zu erhöhen.

5

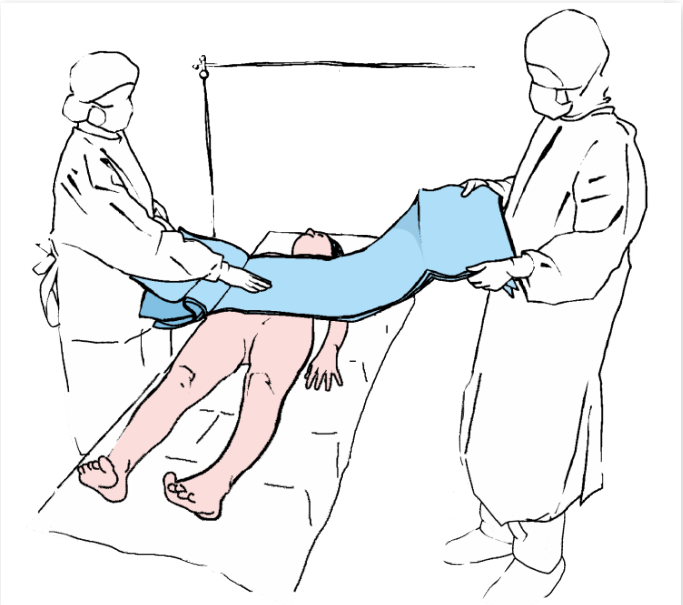

Die Seiten des Tuches ausfalten so, dass sie frei vom OP-Tisch hängen.


6

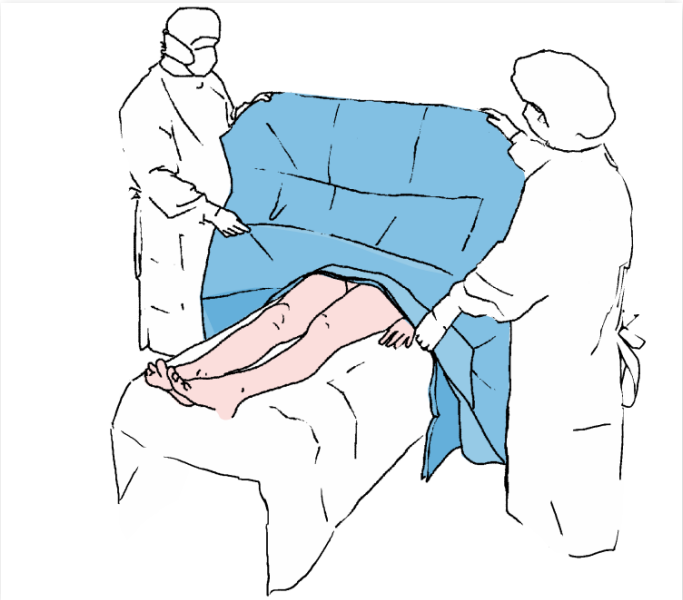

Den oberen Teil des Tuches in Richtung der Anästhesieposition ausfalten. Das Abdecktuch über den Schirm führen und so einen Anästhesieschirm erzeugen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

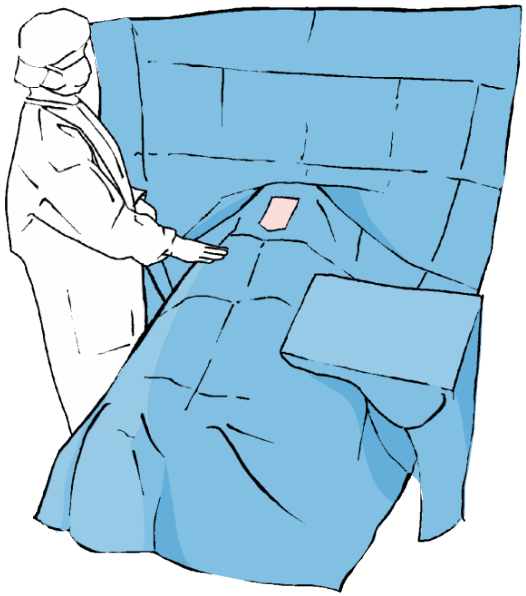

Den unteren Teil des Tuches in Richtung des unteren Endes des OP-Tisches ausfalten und über die Beine des Patienten legen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026