

# Anlegen des Matodrape PCNL-Urologie-Sets

**1**

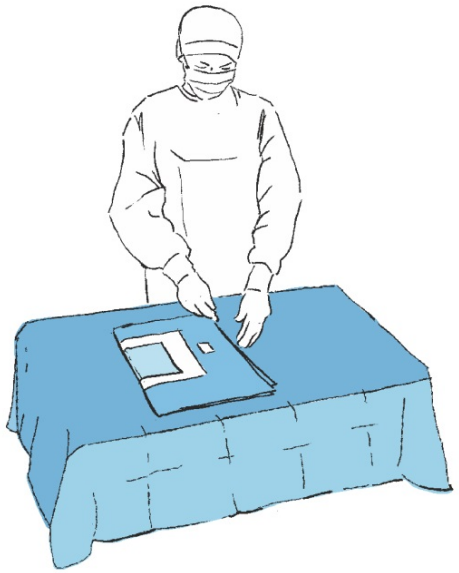

Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

**2**

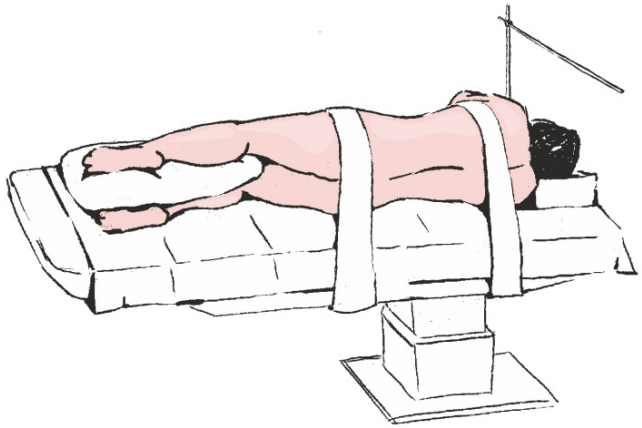

»


**3**



Vor Sicherung des Patienten (Bestimmung des OP-Feldes) die Ausfaltung der Abdeckung berücksichtigen und dazu die auf dem Abdecktuch angebrachten Piktogramme nutzen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

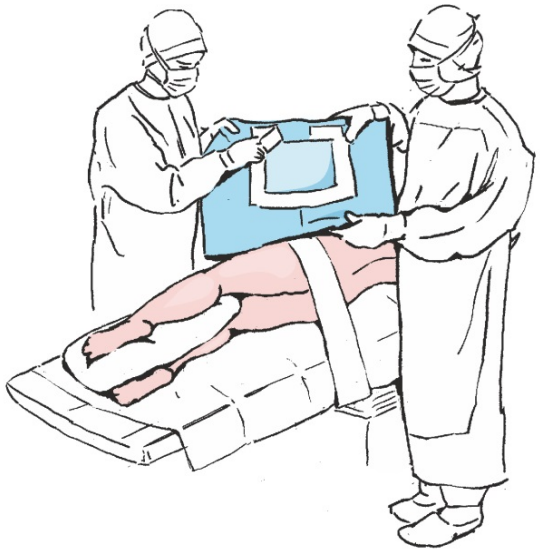


Über dem Kopf des Patienten die Ränder der Abdeckung mit Hilfe einer anderen Person so auslegen, damit sie vom OP-Tisch frei herabhängen, dann das Schutzpapier aus der Öffnung des Hauptabdecktuchs entfernen und die Abdeckung bei gleichzeitiger Bestimmung des OP-Feldes ankleben.

5

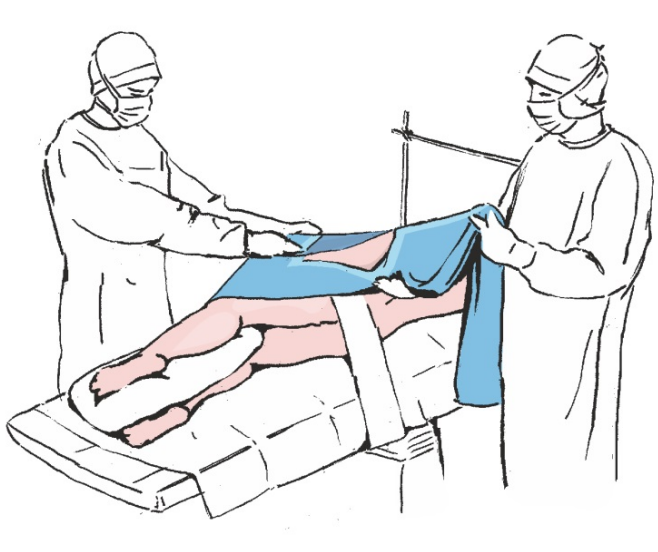

Als Nächstes an der Klebestelle der Abdeckung zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut des Patienten zudrücken.


6

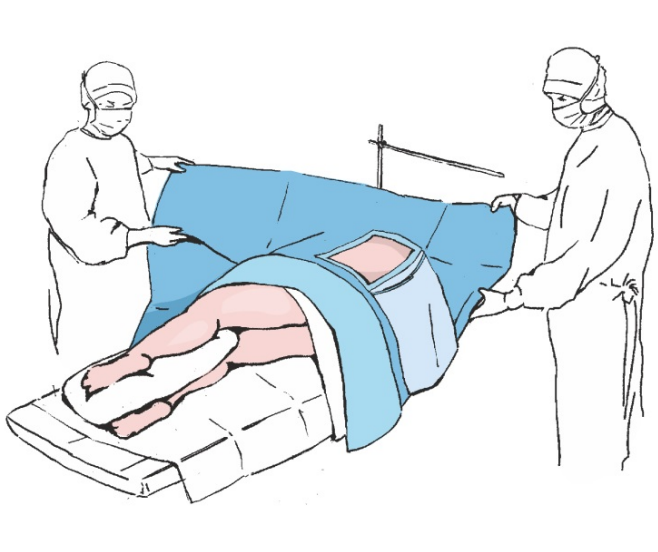

Falten Sie die Seiten der Abdecktücher so aus, dass sie frei vom Operationstisch hängen, und dehnen Sie dann den oberen Teil der Abdecktücher zum Kopf der Patientin aus (in Richtung der anästhesiologischen Position). Führen Sie die Abdeckung über den Rahmen und erzeugen Sie so einen Anästhesieschirm.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

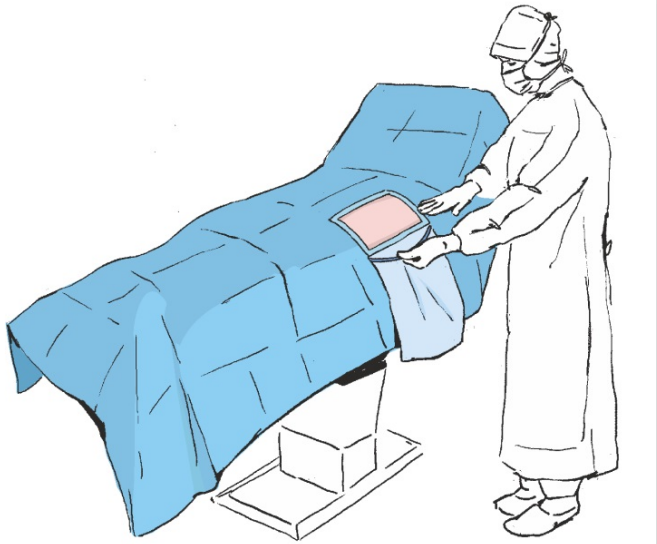

Falten Sie den unteren Teil der Abdeckung in Richtung des unteren Endes des Operationstisches und decken Sie so die unteren Gliedmaßen des Patienten ab. Die Öffnung des Flüssigkeitsauffangbeutels durch Anpassung der Formeinlage formen.

8

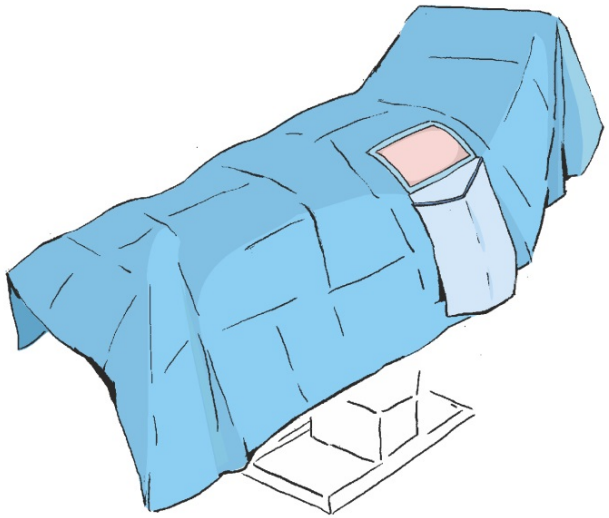

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026