

Anlegen des Matodrape-Sets zur Operation der oberen Extremitäten

1

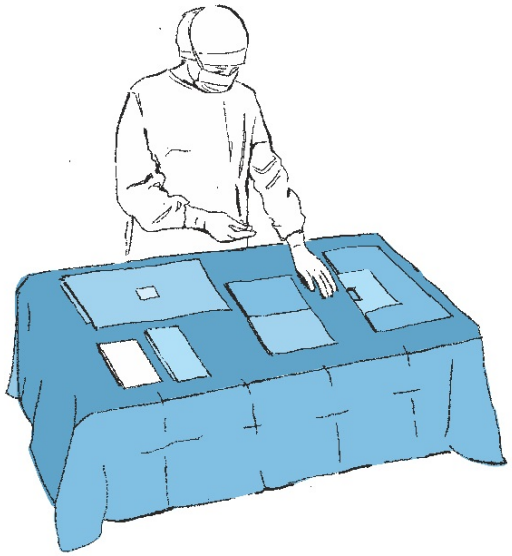


Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

2

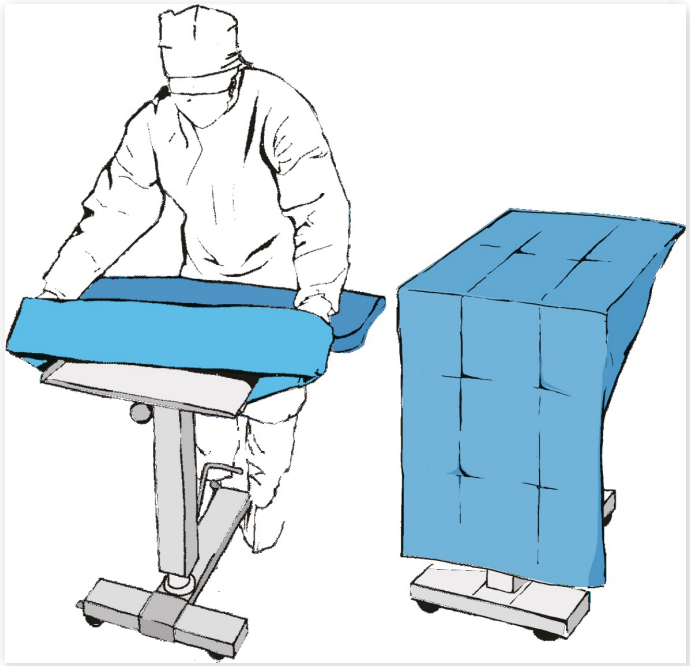

Den Bezug auf den Mayo-Tisch anbringen.

3

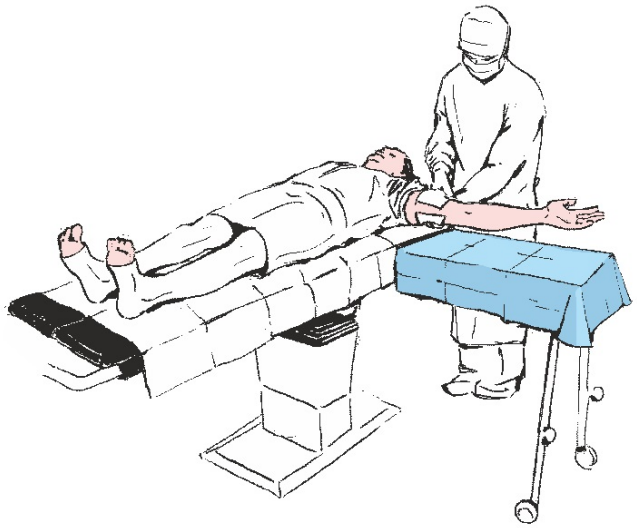


Heben Sie das obere Glied, das sich dem medizinischen Eingriff unterzieht, mit den mit dem Set gelieferten Handtüchern an.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026


Anlegen des Matodrape-Sets zur Operation der oberen Extremitäten

4

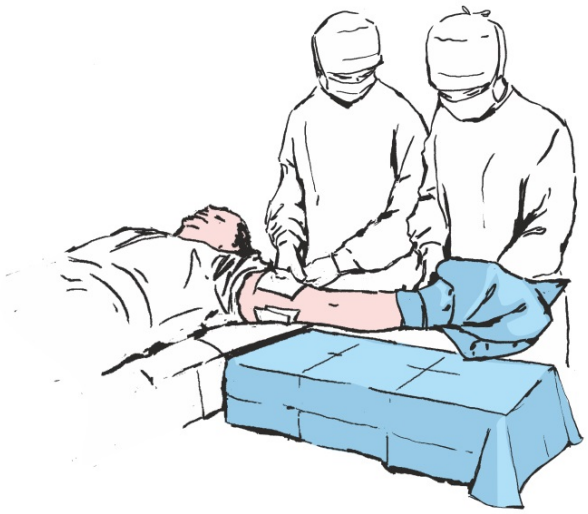

Schieben Sie die Abdeckung an der oberen Extremität des Patienten.

5

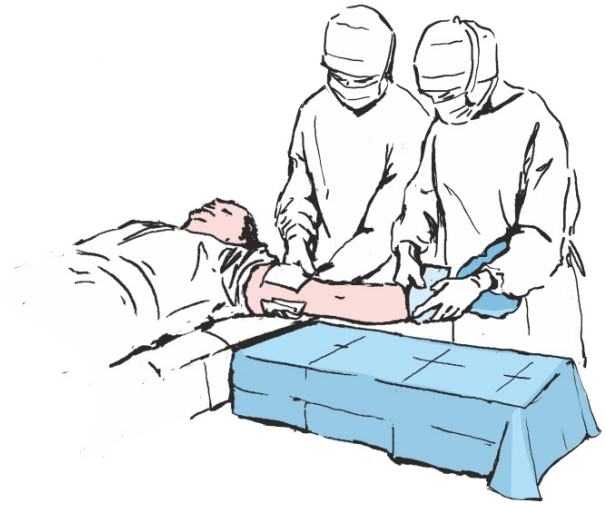

Befestigen Sie die Abdeckung mit den mitgelieferten medizinischen Klebestreifen.

6




Bevor Sie mit der Sicherung der Patientin beginnen (Bestimmung des Operationsfeldes), achten Sie auf die Richtung, in der das Abdecktuch aufgeklappt wird, mithilfe der auf dem Tuch befindlichen Piktogramme.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026


Anlegen des Matodrape-Sets zur Operation der oberen Extremitäten

7

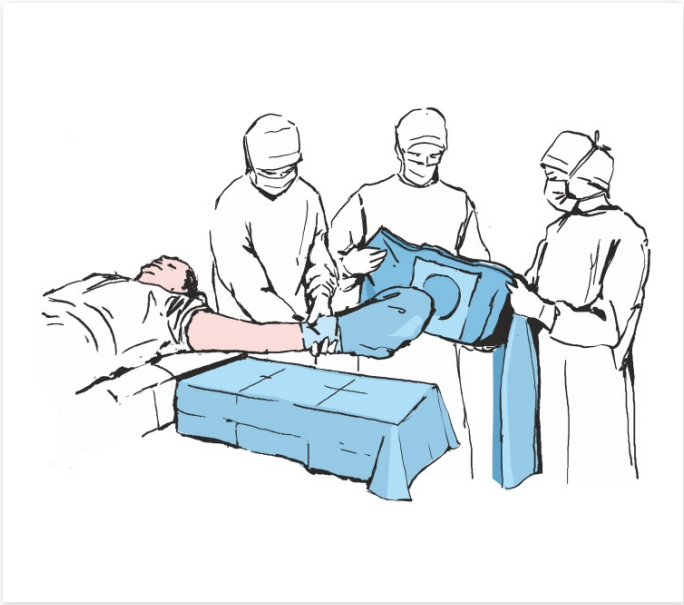


Führen Sie das obere Glied des Patienten durch die elastische Öffnung im Haupttuch.

8

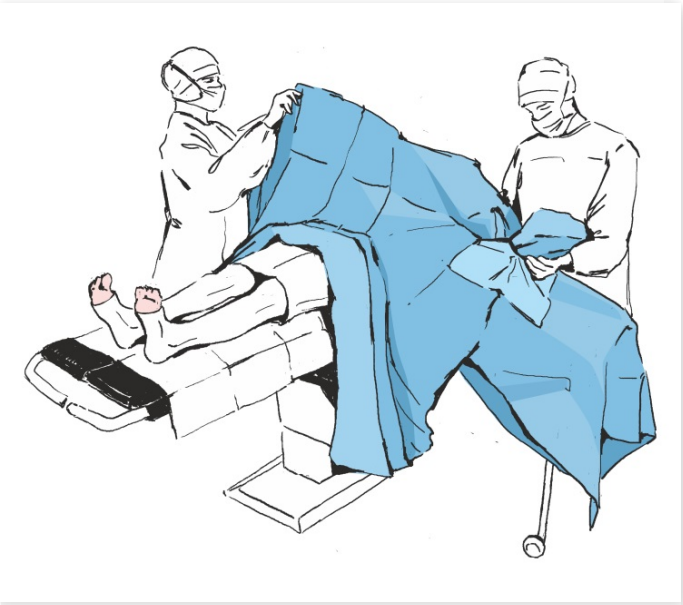

Decken Sie den Gliedstand mit einem am Haupttuch befestigten Seitentuch ab.


9

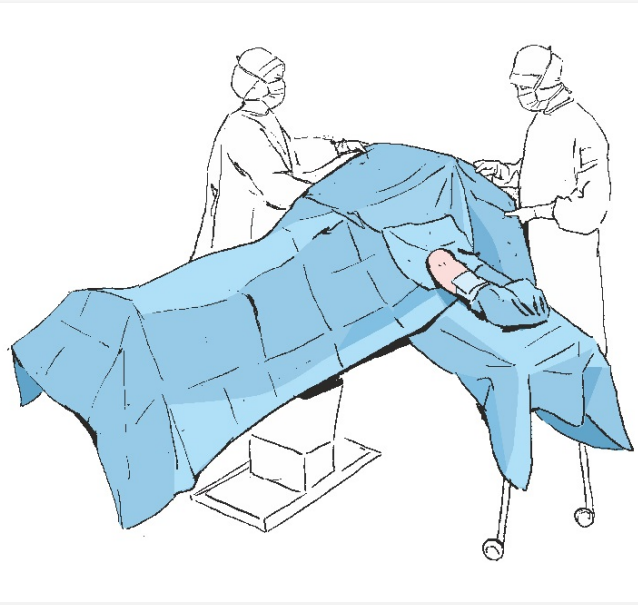

Falten Sie den unteren Teil des Abdecktuchs in Richtung der Unterkante des Operationstisches aus und schützen Sie so die unteren Gliedmaßen des Patienten und dann falten Sie das Tuch in Richtung der anästhesiologischen Position. Führen Sie die Abdeckung über den Rahmen und erzeugen Sie so einen Anästhesieschirm.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

10

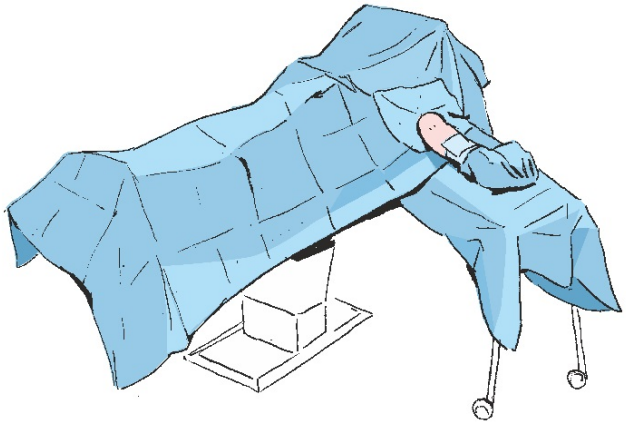

»

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026