

Anlegen des Matodrape Shulter-Sets

1

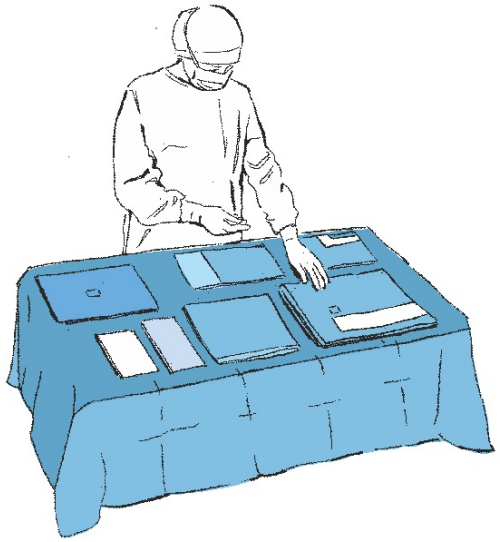


Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

2

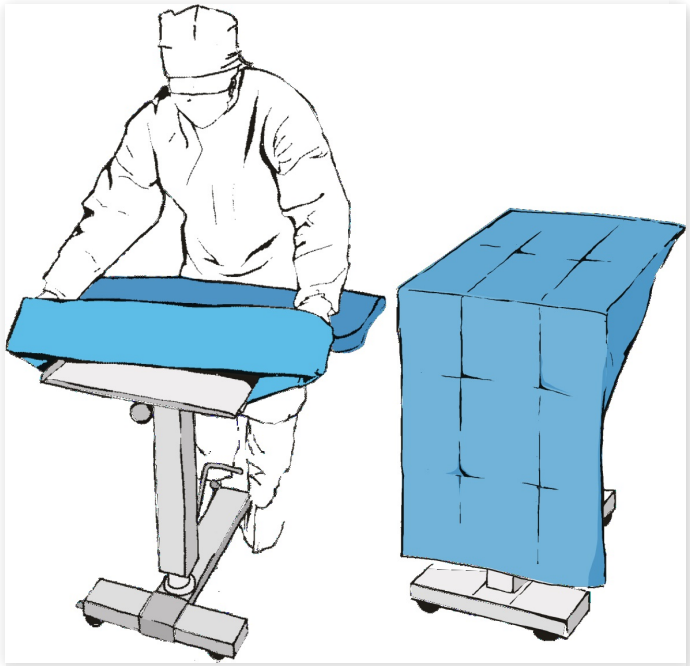

Den Bezug auf den Mayo-Tisch anbringen.

3

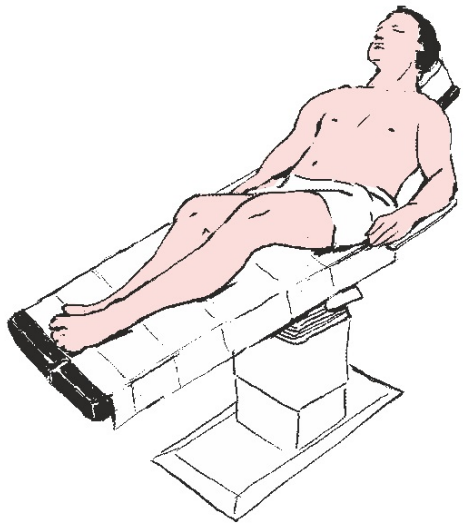


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4




Heben Sie das obere Glied, das sich dem medizinischen Eingriff unterzieht, mit den mit dem Set gelieferten Handtüchern an und legen Sie das zusätzliche Tuch unter das Glied.

5

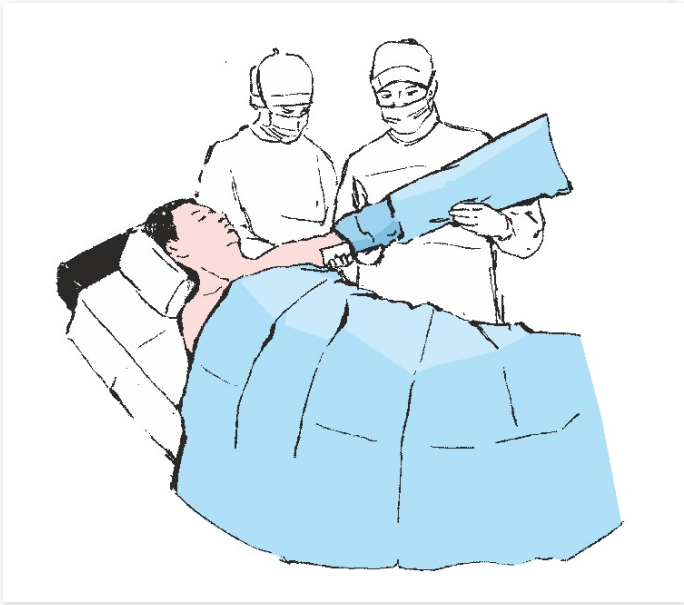

Schieben Sie die Abdeckung an der oberen Extremität des Patienten in einer Höhe unterhalb des Schultergelenks.

6

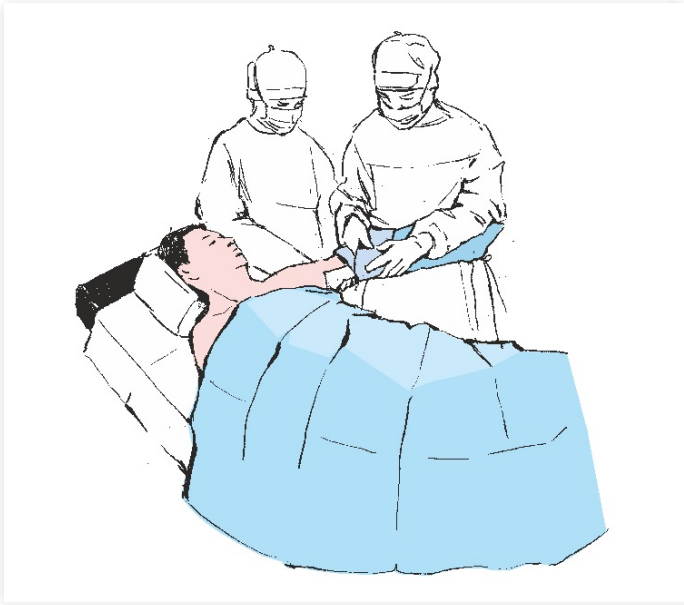

Befestigen Sie die Abdeckung mit den mitgelieferten medizinischen Klebestreifen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7




»

8



Bevor Sie mit der Sicherung der Patientin beginnen (Bestimmung des Operationsfeldes), achten Sie auf die Richtung, in der das Abdecktuch aufgeklappt wird, mithilfe der auf dem Tuch befindlichen Piktogramme.


9

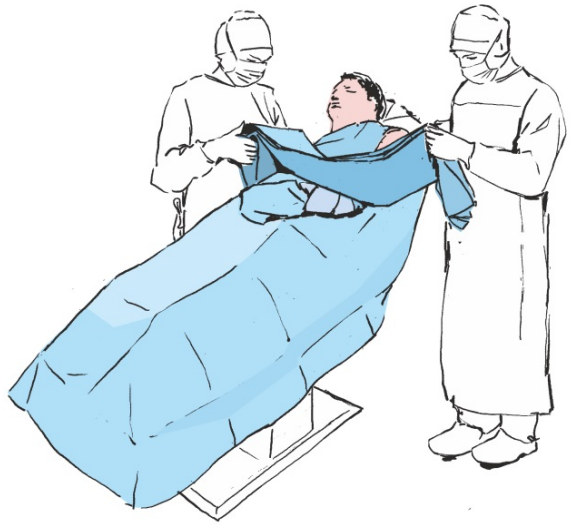

Legen Sie das Tuch mit einem U-förmigen Ausschnitt unter die Schulter des Patienten.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

10

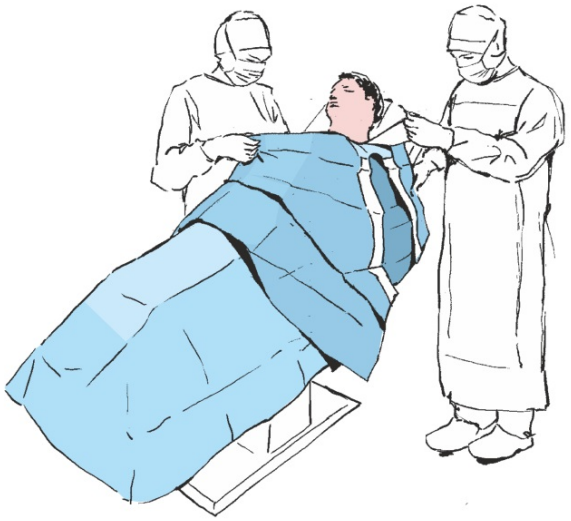


Falten Sie den unteren Teil des Abdecktuchs in Richtung der Unterkante des Operationstisches aus und decken Sie so die unteren Gliedmaßen des Patienten.

11

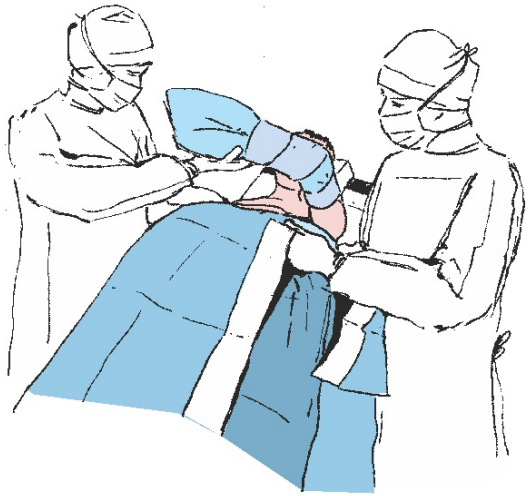

Entfernen Sie das Schutzpapier von dem kurzen Stück des Klebebandes und kleben Sie es fest unter die Achsel des Patienten.


12

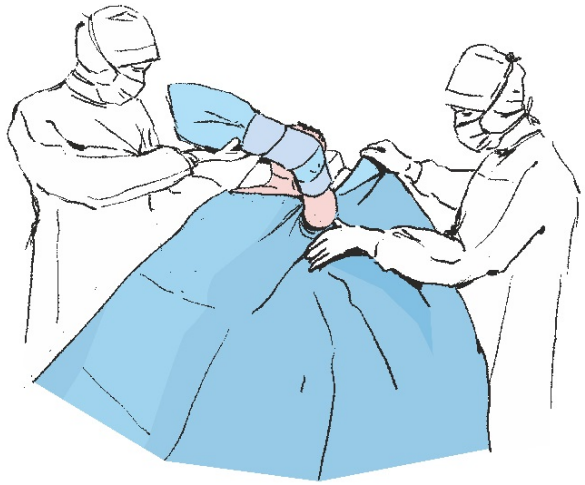

Entfernen Sie das verbleibende Schutzpapier und kleben Sie das Abdecktuch vorsichtig um die Schulter in Richtung des Kopfes des Patienten, wodurch die Seitengrenzen des Operationsfeldes begrenzt werden. Drücken Sie auf die Drapierungsadhäsionsstelle, um die Adhäsion des Klebebandes an der Haut des Patienten zu erhöhen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

13

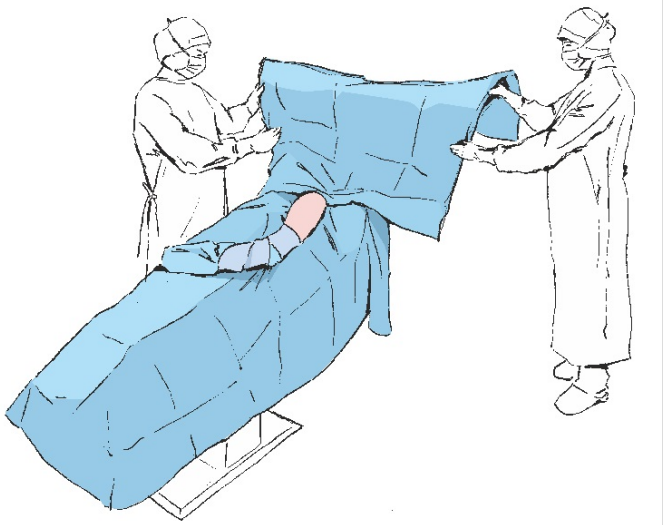

Entfernen Sie das Schutzpapier vom oberen Abdecktuch und kleben Sie das Abdecktuch, wodurch der obere Rand des Operationsfeldes entsteht. Drücken Sie darauf. Falten Sie das Tuch in Richtung der anästhesiologischen Position. Führen Sie die Abdeckung über den Rahmen und erzeugen Sie so einen Anästhesieschirm.

14

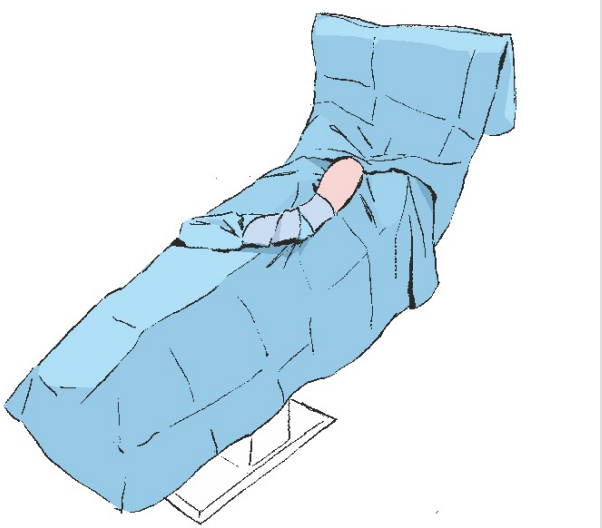

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026