

Anlegen des Matodrape Strumektomie-Sets

1

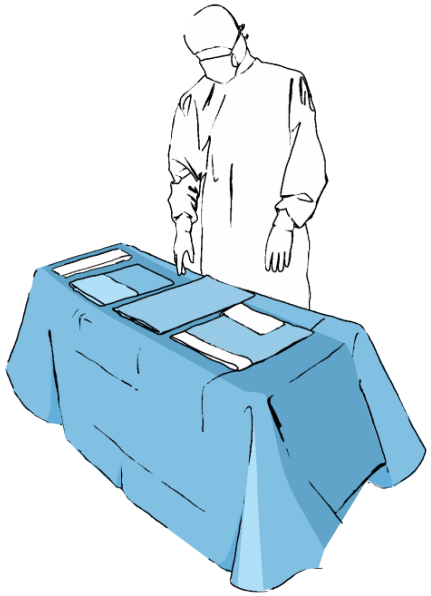


Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

2

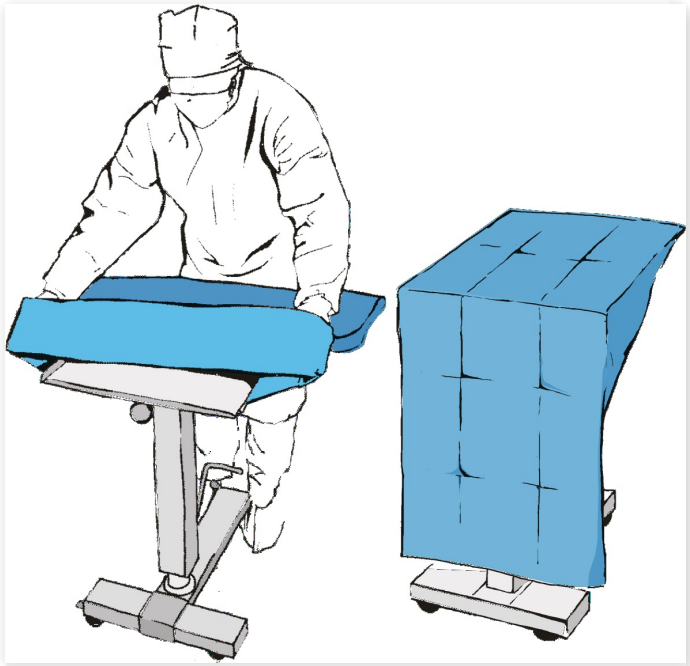

Den Instrumententischbezug auflegen.


3

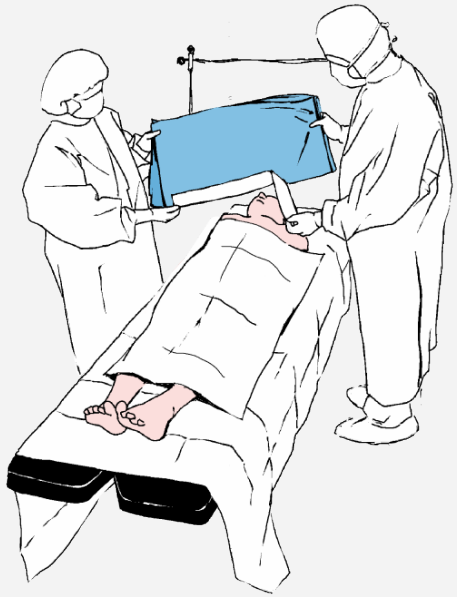

Den Schutzstreifen von dem unteren Abdecktuch (nur mit Klebestreifen) entfernen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

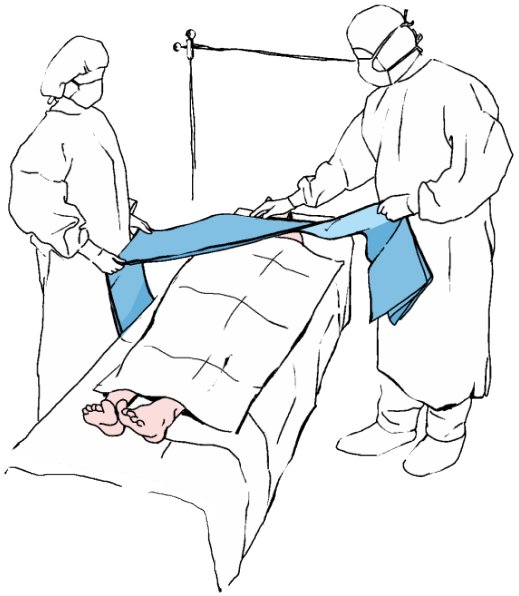


Das Tuch von Seite zu Seite ausfalten und ankleben um den oberen Teil der Brust um die untere Grenze des OP-Feldes zu bestimmen.

5

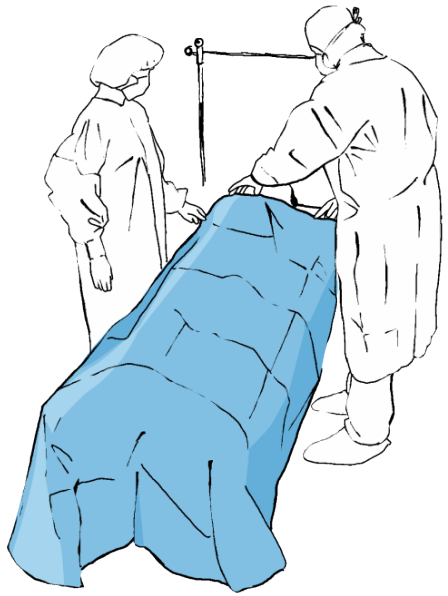

Den unteren Teil des Tuches in Richtung des unteren Endes des OP-Tisches ausfalten und über die Beine des Patienten legen.


6

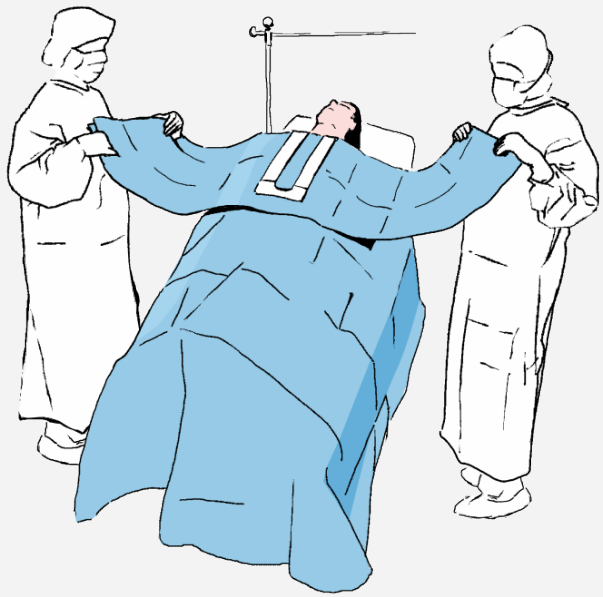

Das Tuch mit dem U-Ausschnitt auf das aufgeklappte untere Tuch anlegen, sodass die Klebestreifen sich oben finden.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

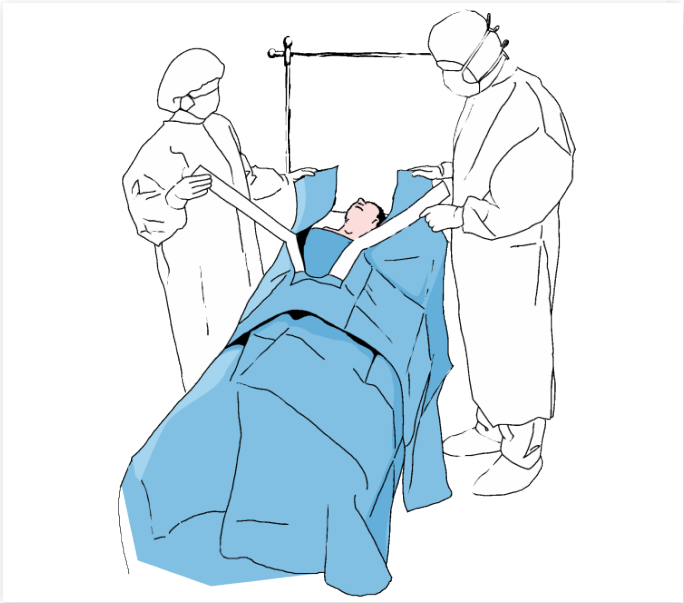


Den Schutzstreifen entfernen.

8

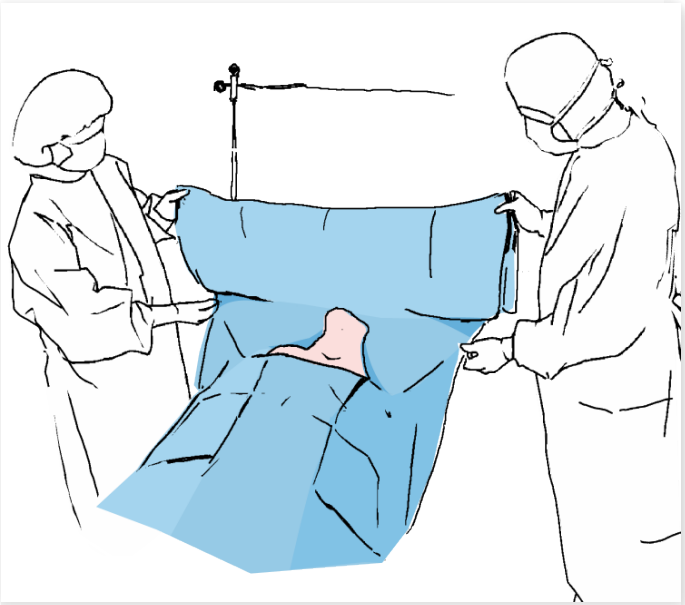

Das Tuch ankleben so, dass Falten vermieden werden und die oberen und seitlichen Grenze des OP-Feldes festlegen. Danach an der Klebestelle das Tuch drücken, um die Haftung des Klebebandes auf der Haut des Patienten zu erhöhen. Das Tuch in Pfeilrichtung ausfalten (in Richtung der Anästhesieposition).

9

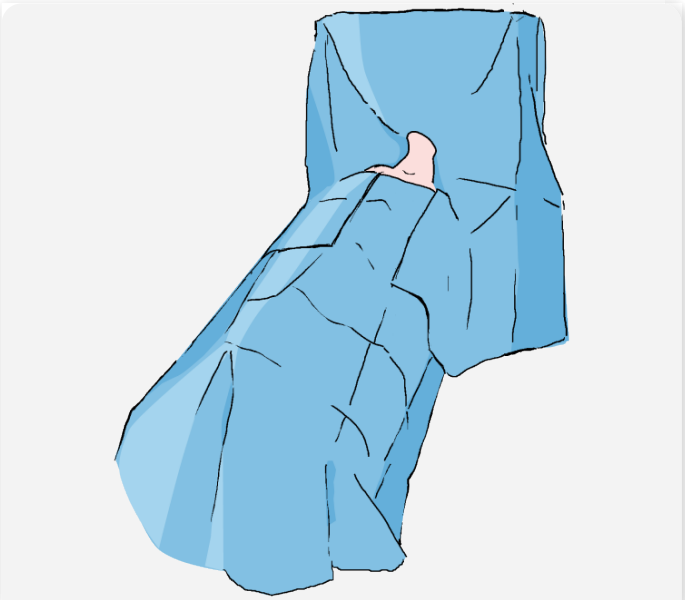

Den oberen Teil seitens des Patientin-Kopfs an der Anästhesie-Abschirmung befestigen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026