

Anlegen des Matodrape Thorakotomie-Sets

1

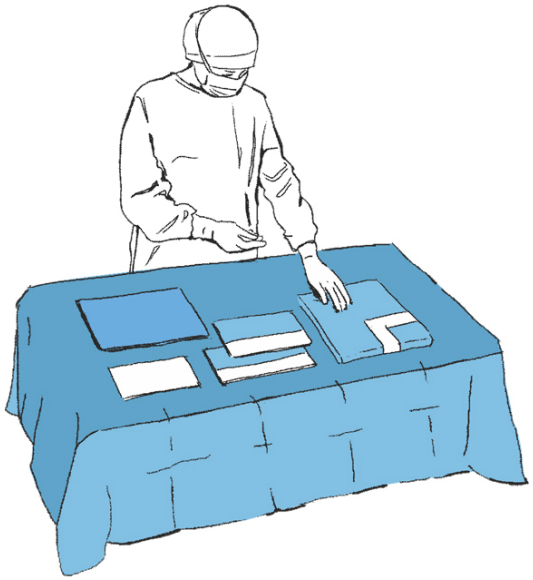

Die Außenverpackung bei Bewahrung der aseptischen Bedingungen öffnen und das Set auf den Instrumententisch herausnehmen. Das äußere Abdecktuch auf den Instrumententisch und darauf die jeweiligen Setelemente auslegen.

2

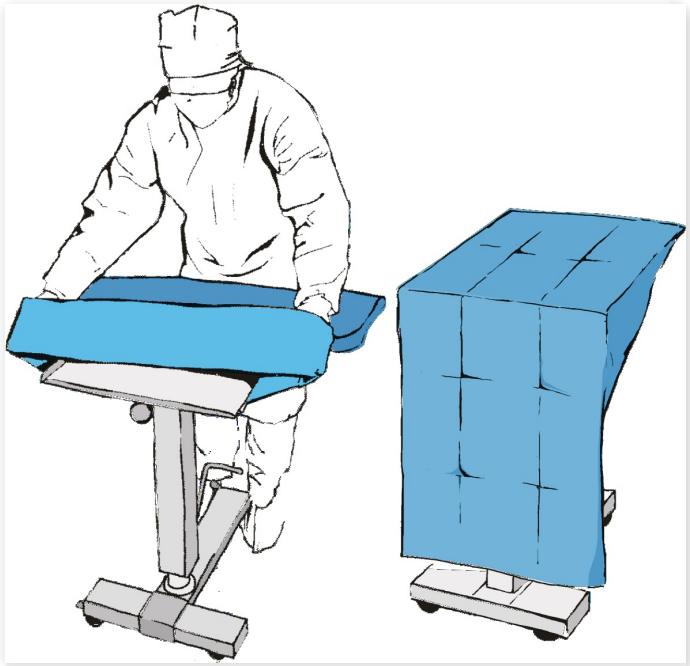

Den Bezug auf den Mayo-Tisch anbringen.


3



Vor Sicherung des Patienten die Auslegungsrichtung der Abdeckung berücksichtigen und dazu die auf dem Abdecktuch angebrachten Piktogramme nutzen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

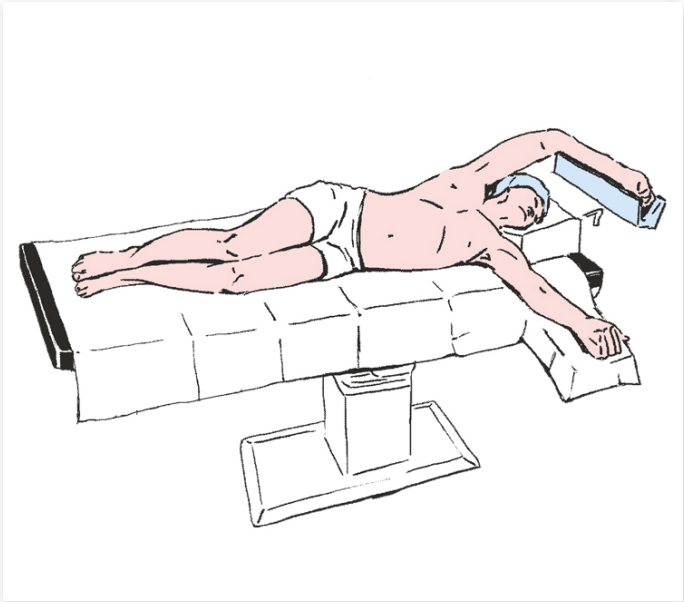


»

5



Die Abdeckung mit Ausschnitt in Form der „U”-Buchstabe über dem Patienten legen.


6

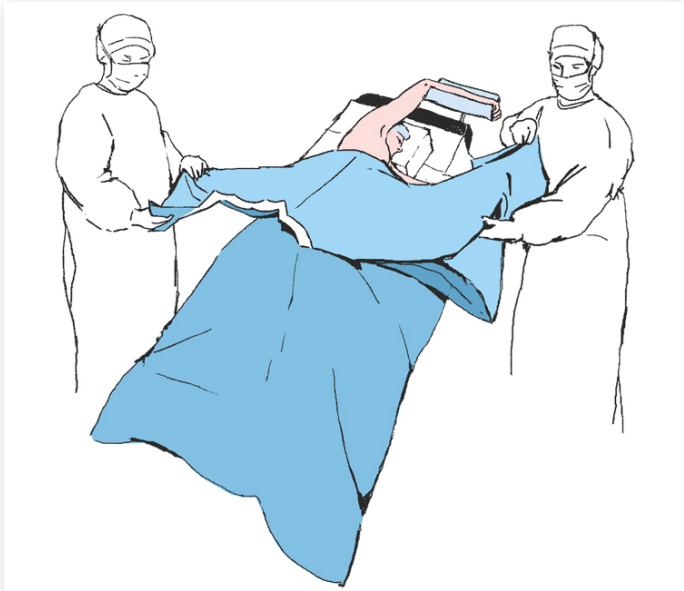

Den unteren Teil der Abdeckung in Richtung des unteren Randes des OP-Tisches auslegen und somit die unteren Extremitäten des Patienten schützen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

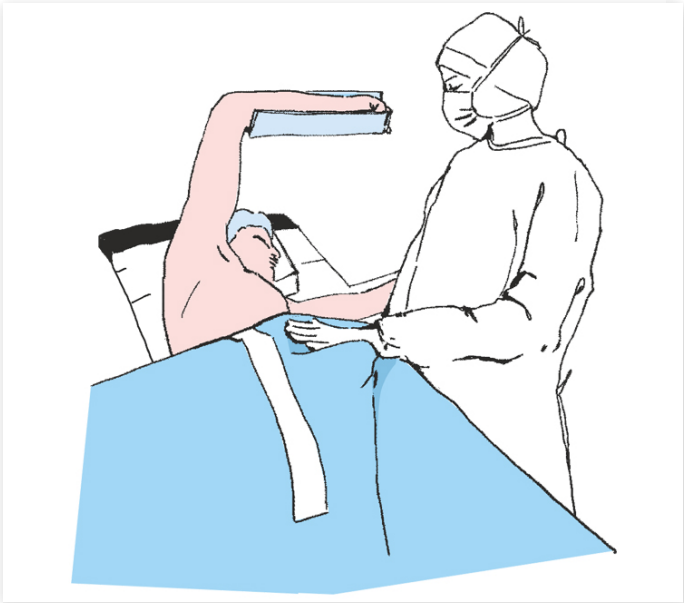


Das Schutzpapier vom kürzeren Abschnitt des Klebebandes entfernen und an den unteren Teil des Brustkorbes des Patienten ankleben.

8

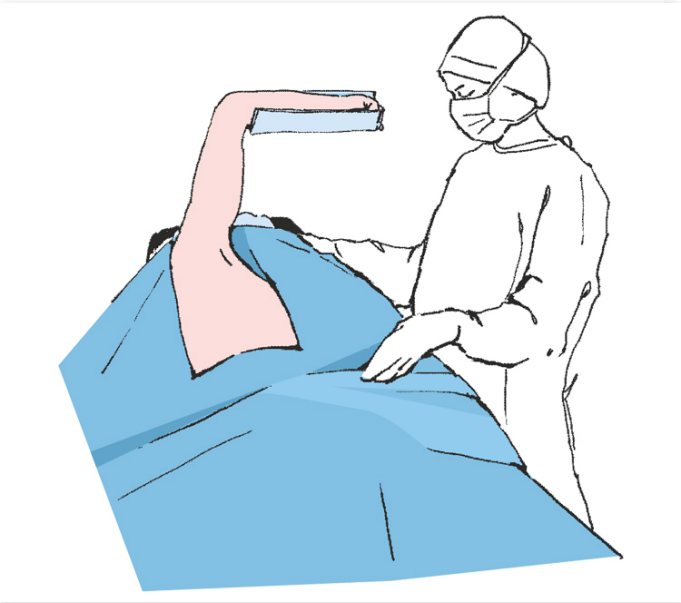

Die übrigen Sicherungsbänder entfernen, die Seite des Brustkorbes genau bekleben und sich zum Kopf des Patienten bei Bestimmung der unteren und seitlichen Grenzen des OP-Feldes richten. An der Klebestelle der Abdeckung zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut der Patientin zudrücken.


9

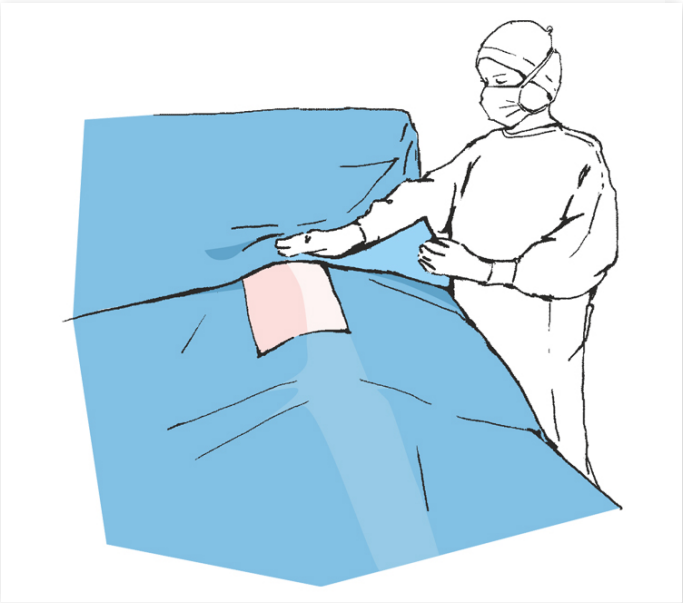

Das Sicherungsband vom oberen Abdecktuch entfernen und die Abdeckung an den oberen Teil des Brustkorbes so ankleben. An der Klebestelle zwecks Erhöhung der Haftfähigkeit des Klebebandes an die Haut der Patientin zudrücken. Das Abdecktuch gemäß der Pfeilrichtung entfalten und durch den Ständer ziehen.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

10

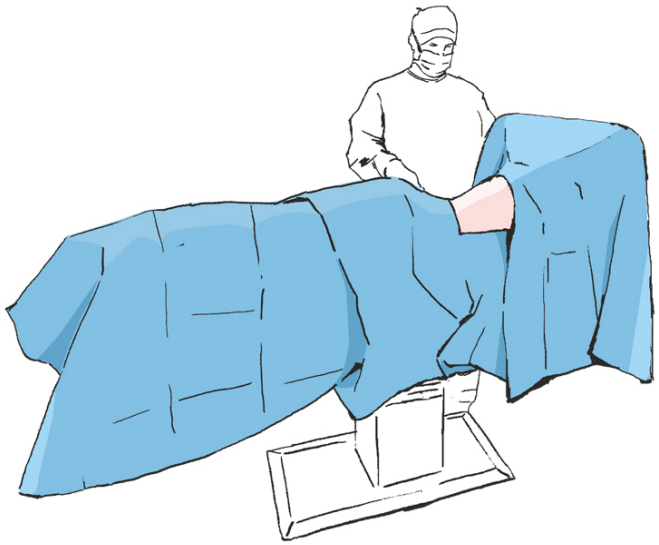

»

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026