

Anlegen des Matodrape TUR-Urologie-Sets

1

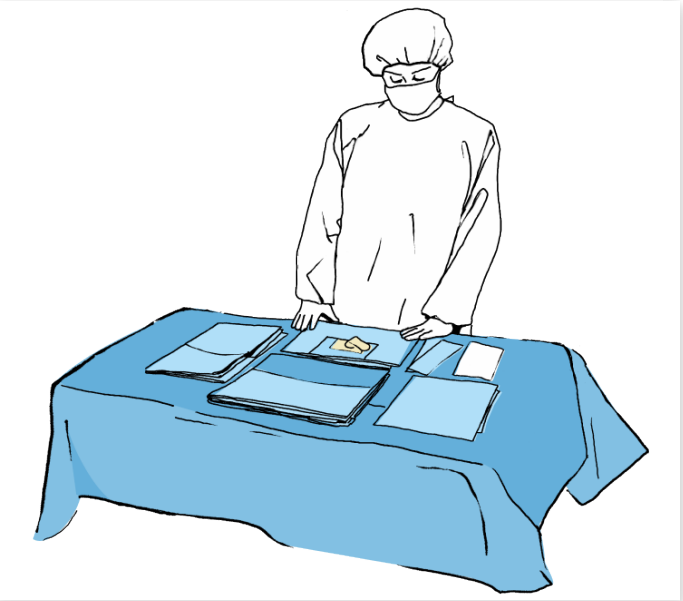


Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

2

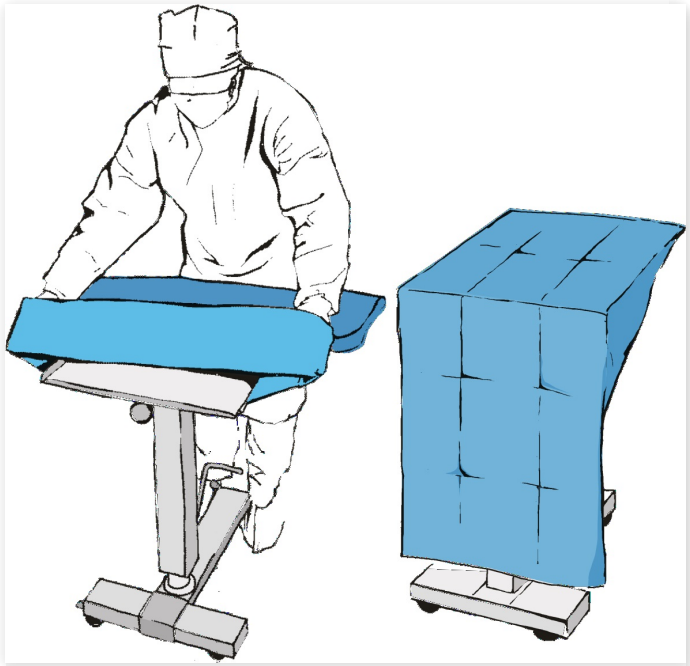

Den Instrumententischbezug auflegen.


3

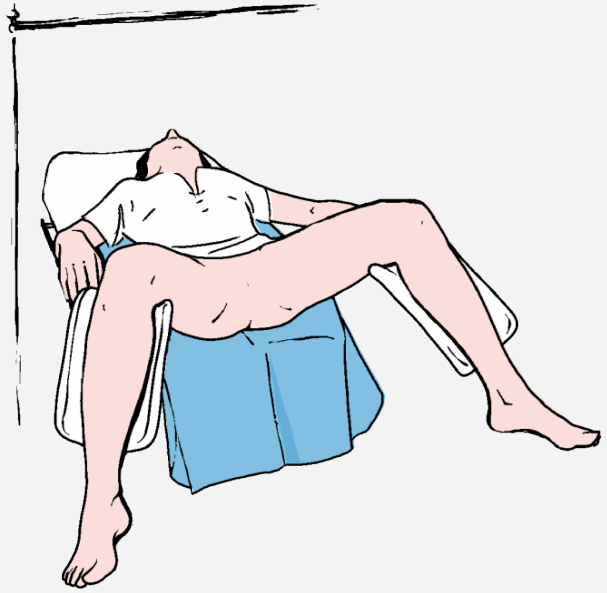

Das kleinere Tuch unter das Gesäß des Patienten legen, das sich in urologischer Position befindet.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4

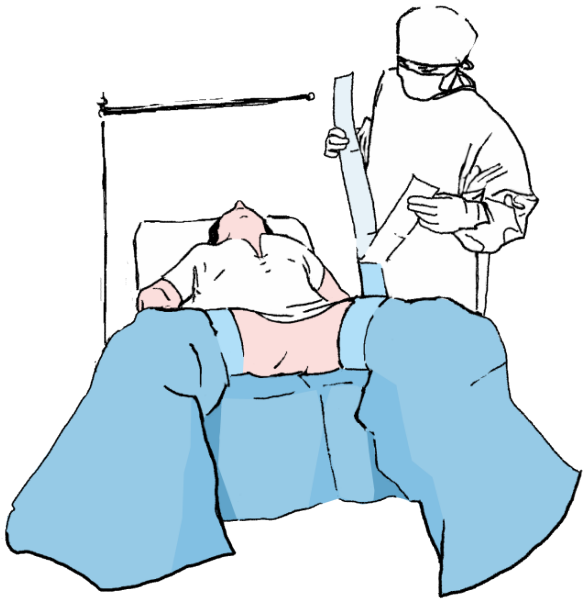


Die Beinbezuge anziehen und mit medizinischen Klebestreifen befestigen.

5



Bevor den Patienten zu abdecken (Abgrenzung des OP-Feldes), auf die Richtung achten, in der das Abdecktuch ausgefaltet werden soll, mithilfe der auf dem Tuch angebrachten Piktogrammen.


6

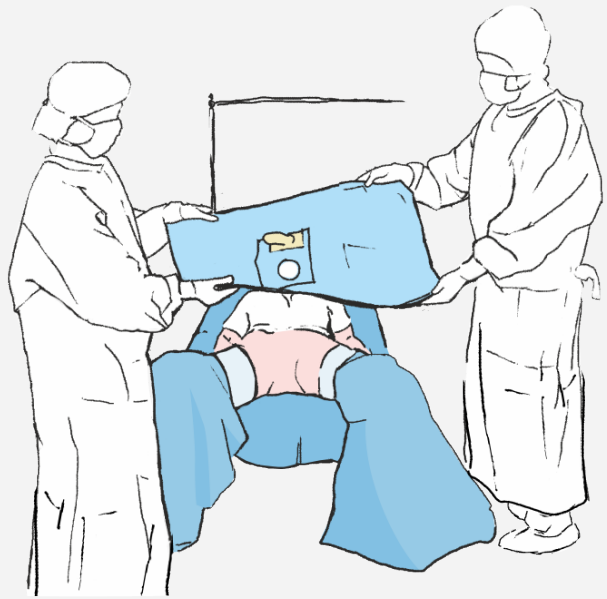

Das Haupttuch zum Patienten hin teilweise ausfalten, die Löcher an den entsprechenden Stellen des OP-Feldes anpassen und das Tuch auf den Patienten legen, um so das OP-Feld zu bestimmen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

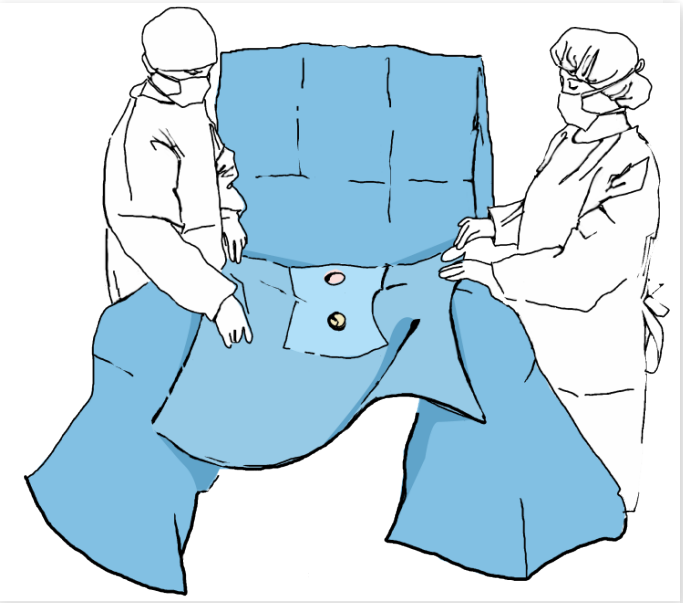

Die Seiten des Tuches ausfalten so, dass sie frei vom OP-Tisch hängen, und den oberen Teil des Tuches in Richtung der Anästhesieposition ausfalten. Das Abdecktuch über den Schirm führen und so einen Anästhesieschirm erzeugen. Den unteren Teil des Tuches in Richtung des unteren Endes des OP-Tisches, teilweise zwischen den Beinen des Patienten, ausfalten.

8

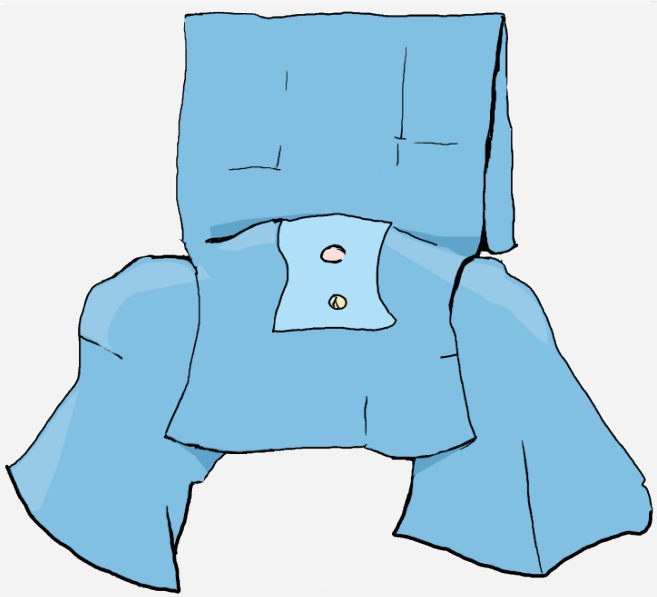

»

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026