

Anlegen des Matodrape Zystoskopie-Sets

1

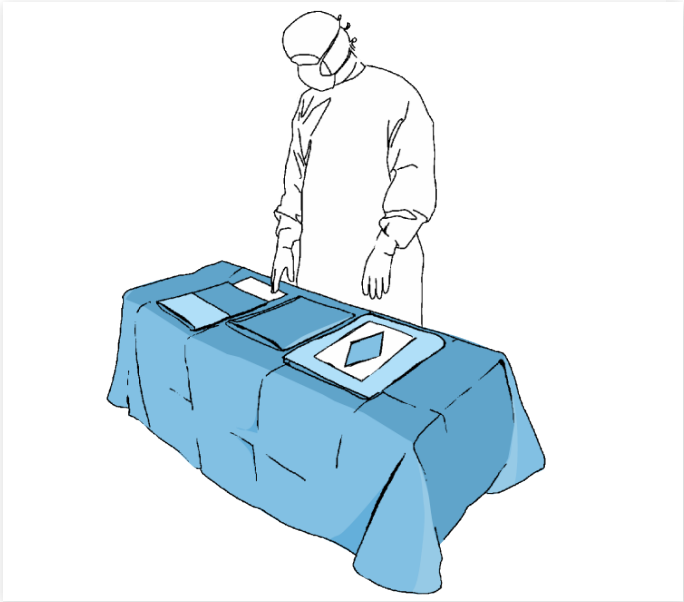

Die Umverpackung unter Beachtung der Grundsätze der Asepsis öffnen und das Set auf den Instrumententisch legen. Das äußere Tuch auf dem Instrumententisch und die einzelnen Elemente des Sets darauf ausbreiten.

2

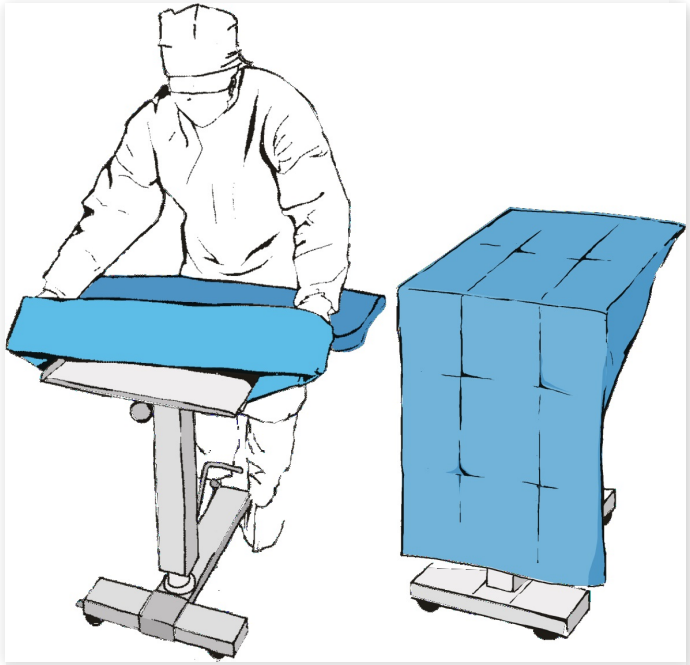

Den Instrumententischbezug auflegen.

3



Das kleinere Tuch unter das Gesäß des Patienten/der Patientin legen, das sich in urologischer/gynäkologischer Position befindet.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

4



Die Beinbezuge anziehen.

5



Bevor die Patientin zu abdecken (Abgrenzung des OP-Feldes), auf die Richtung achten, in der das Abdecktuch ausgefaltet werden soll, mithilfe der auf dem Tuch angebrachten Piktogrammen.


6



Den Schutzstreifen von dem unteren Haupt-Tuch entfernen.


©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026

7

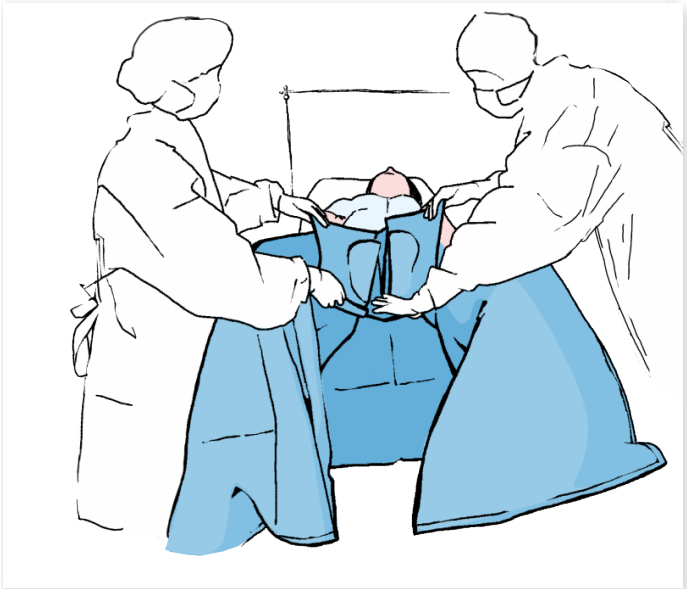

Das Tuch ankleben um die Grenze des OP-Feldes festzulegen. Danach an der Klebestelle das Tuch drücken, um die Haftung des Klebebandes auf der Haut der Patientin zu erhöhen.

8

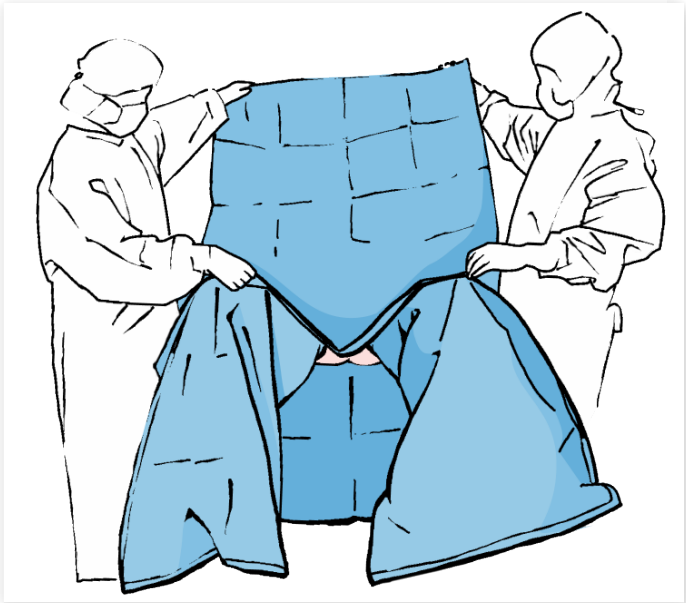

Die Seiten des Tuches ausfalten so, dass sie frei vom OP-Tisch hängen, und den oberen Teil des Tuches in Richtung der Anästhesieposition ausfalten. Das Abdecktuch über den Schirm führen und so einen Anästhesieschirm erzeugen.

9



Den unteren Teil des Tuches in Richtung des unteren Endes des OP-Tisches, teilweise zwischen den Beinen der Patientin, ausfalten.

©Copyright 2026 de.matopat-global.com | Zuletzt aktualisiert: 04.11.2026